

VERMEIREN

Trigo T

BRUKSANVISNING





INNEHÅLL

Innehåll	1
Förord	2
1 Produktbeskrivning	3
1.1 Tillbehör	3
2 Före användning	4
2.1 Avsedd användning.....	4
2.2 Allmänna säkerhetsinstruktioner	4
2.3 Transport.....	5
2.4 Ihop- och uppfällning.....	5
2.5 Montering och avmontering av drivhjul.....	6
2.6 Förvaring	6
3 Användning	7
3.1 Parkeringsbromsar	7
3.2 Körhandtag (steglös justering)	7
3.3 Armstöd/sidoskydd.....	8
3.4 Fällbart ryggstöd	8
3.5 Tippskydd (tillval).....	8
3.6 Avtagning och montering av fotstöd	8
3.7 Komfortjusteringar	9
3.8 Förflyttning till och från rullstolen	10
3.9 Användning av rullstolen	10
4 Underhåll	11
4.1 Regelbundet underhåll	11
4.2 Underhållsinstruktioner.....	11
4.3 Felsökning.....	12
4.4 Kassering	12
5 Tekniska data	13



FÖRORD

Vi gratulerar dig till att du har valt en Vermeiren-rullstol!

Denna rullstol har tillverkats av en kompetent och engagerad personal. Den är framtagen och konstruerad enligt strikta kvalitetsstandarder som Vermeiren har bundit sig vid.

Vänligen läs noga igenom denna bruksanvisning. Den hjälper dig att lära känna hur rullstolen fungerar, vilka möjligheter den har och vilka begränsningar som ska beaktas. Skulle du ha frågor efter att ha läst bruksanvisningen - kontakta gärna din återförsäljare. Han/hon ser fram emot att hjälpa dig.

Viktigt!

För din egen säkerhet och för att garantera en lång livslängd för din rullstol är det viktigt att du tar bra hand om den och låter den kontrolleras och servas regelbundet.

Garantin för denna produkt utgår ifrån att produkten används på ett avsett sätt och underhållet utförs enligt anvisningar i denna bruksanvisning. Skador som härrör sig från olämplig användning eller bristfälligt underhåll leder till att garantin upphör att gälla.

Denna bruksanvisning presenterar det senaste utvecklingsstadiet av produkten. Vermeiren förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten utan att förändra eller ersätta föregående redan levererade modeller.

I denna bruksanvisning används bilder för att förtydliga instruktioner. Vissa detaljer i bilderna kan avvika från utförandet på din produkt.

Ytterligare informatio

På vår hemsida <http://www.vermeiren.com/> hittar du alltid den senaste versionen av informationen i denna bruksanvisning. Vänligen besök hemsidan regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar.

De som har nedsatt syn kan ladda ned en elektronisk version av denna bruksanvisning och ha den uppläst med hjälp av ett text till tal-program.



Bruksanvisning

För användare och fackhandlare



Monteringsanvisningar

För fackhandlare



Underhållsmanual för rullstolar

För fackhandlare



EU-försäkran om överensstämmelse

1 PRODUKTBESKRIVNING

Trigo T är en hopfällbar aktivrullstol med två avtagbara fotplattor och en mängd olika justeringsalternativ. Den är lätt att manövrera och lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk.

Trigo T finns att få i flera olika utföranden, vilka kan ses på vår hemsida. Se också kapitel 5.

1. RYGGSTÖD
2. SIDOSKYDD (armstöd som tillval)
3. SITS
4. RAM
5. FOTPLATTA (2x)
6. LÄNKHJUL
7. DRIVHJUL
8. KÖRHANDTAG (tillval)
9. FOTSTÖD
10. BROMS
11. IDENTIFIKATIONSSKYLTL



1.1 Tillbehör

Följande tillbehör finns att få till Trigo T:

- Käpphållare
- Tippskyddshjul
- Transportrullar
- Tvärstag för ryggstöd
- Sidstöd – vänster/höger
- Terränghjul 24"
- Gelbeklädd drivring
- Ekerskydd


2 FÖRE ANVÄNDNING

Denna bruksanvisning gäller för rullstolen Trigo T i alla utföranden.

2.1 Avsedd användning

- Denna rullstol är lämplig att användas både inomhus och ute.
- Denna rullstol är framtagen och konstruerad för att endast transportera en (1) person med maximal brukarvikt enligt den tekniska specifikationen i kapitel 5. Rullstolen är inte avsedd för att transportera varor eller att användas till andra ändamål än det som framgår ovan.
- Denna rullstol är avsedd för att manövreras av brukaren som sitter i den. Den kan också styras av en vårdare om extra körhandtag monteras.
- Använd INTE denna rullstol om du har ett fysiskt eller mentalt tillstånd som kan utsätta dig själv eller andra människor för fara om du kör rullstolen. Rådfråga din läkare och informera din Vermeiren-fackhandlare om läkarens omdöme.
- Använd endast av Vermeiren godkända tillbehör och reservdelar.
- Läs noga igenom alla tekniska data och begränsningar i kapitel 5 innan du börjar använda din rullstol.

2.2 Allmänna säkerhetsinstruktioner

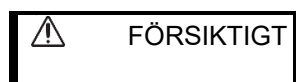

Risk för personskada och/eller materiell skada

Läs noga igenom och följ instruktionerna i denna bruksanvisning.

Ta i akt följande allmänna säkerhetsåtgärder när du använder rullstolen:

- Använd inte rullstolen om du är under påverkan av alkohol, läkemedel eller andra ämnen som kan inverka på din körförmåga.
- Tänk på att vissa delar av rullstolen kan bli mycket varma eller kalla på grund av temperatur i omgivningen, solsken eller uppvärmningsapparat. Var försiktig när du rör vid sådana delar. Klä dig varmt om du ska ut vid kallt väder. När du kör utomhus kan det vara bra att ha skyddshandskar för att få bättre grepp på drivhjulen.
- Utför inga ändringar på din rullstol.

Följande symboler som ingår i standarderna ISO 7000, ISO 7001 och IEC 417 är tillämpliga för din rullstol.



Maximal brukarvikt (kg)



Lämplig för inomhus-utomhusanvändning



Maximal stigningsförmåga (grader)



Icke avsedd att användas som fordonssäte



Typskylt



Klämrisk för händer

2.3 Transport



Risk för personskada



Använd INTE rullstolen som ett fordonssäte. Observera följande symbol.

1. Se 3.8 för anvisningar för förflyttning från rullstolen till ett fordonssäte.
2. Fäll ihop rullstolen så den upptar så litet utrymme som möjligt (se 2.4).
3. Lägg rullstolen och dess drivhjul i bagageutrymmet eller bakom passagerarsätet. Om bagage- och passagerarutrymmena inte är separerade fäst rullstolens ram till fordonet med till exempel ett säkerhetsbälte. Använd dock inte samma säkerhetsbälte för att fästa både rullstol och passagerare.

2.4 Ihop- och uppfällning



Risk för personskada och/eller materiell skada

- Säkerställ att dina fingrar inte hamnar i kläm i lederna i handtagen eller ramkrysset.
- Tänk på fotstödens svängradie. Se till att ett fotstöd inte svänger ut och skadar människor eller saker.

Gör så här för att fälla ihop rullstolen:

4. Ta av sitskudden.
5. Montera av fotstöden (se 3.6).
6. Fatta tag om sitsen (15) fram- och baktill på mitten och dra uppåt.
7. Skjut ihop sitsrören (5).
8. Montera av drivhjulen om nödvändigt (se 2.5).

Gör så här för att fälla upp rullstolen:

1. Dra isär sitsrören (5) och tryck ned sitsramen både på vänster- och högersidan tills sitsen är platt och ramen snäpper på plats.
2. Montera drivhjulen om de har tagits av (se 2.5).
3. Sätt fast sitskudden (4) på sitsen med kardborreband. Se till att kuddens band ligger tvärs över sitsens band.
4. Montera tillbaka fotstöden (se 3.6).



2.5 Montering och avmontering av drivhjul

Gör så här för att avmontera drivhjulen:

1. Tryck ned knappen (43) och håll den nedtryckt medan du drar ut hjulaxeln ur hålet i ramen.
2. Gör på samma sätt med det andra drivhjulet och ställ rullstolen varsamt på de bakre ramrören.

Gör så här för att montera drivhjulen:

1. Ta ett av drivhjulen och lägg rullstolen på sidan.
2. Tryck ned knappen (43) och håll den nedtryckt medan du sätter in hjulaxeln i hålet i ramen.
3. Släpp knappen för att låsa hjulet. Se till att det snäpper på plats.
4. Gör på samma sätt med det andra drivhjulet.
5. Kontrollera att båda drivhjulen sitter ordentligt.



2.6 Förvaring

- i** Förvara rullstolen på en torr plats. Hög fuktighet kan orsaka mögelbildning och skada stoppningen. Se också kapitel 5.

3 ANVÄNDNING

**FÖRSIKTIGT**

Risk för personskada och/eller materiell skada

Se till att dina händer, kläder, bälten eller smycken inte fastnar i hjul eller andra rörliga delar när du kör eller justerar rullstolen.

3.1 Parkeringsbromsar

**FÖRSIKTIGT**

Risk för personskada och/eller materiell skada

- Frigör aldrig båda bromsarna samtidigt.
- Låt alltid din fackhandlare justera bromsarna.
- Parkeringsbromsarna får inte användas för att sakta ner rullstolen vid körning.

Användning av parkeringsbroms


i Parkeringsbromsarna kan monteras på två olika sätt vilket också avgör om bromsspaken ska dras eller skjutas för att låsa bromsen. Monteringssättet ska väljas när man beställer rullstolen.

Gör så här för att frigöra parkeringsbromsarna (A):

1. Fatta med ena handen tag i en av drivringarna.
2. Dra eller skjut bromsspaken (10) på det MOTSATTA hjulet.
3. Gör på samma sätt med bromsen på det andra hjulet.

Gör så här för att ansätta parkeringsbromsarna (B):

1. Fatta med ena handen tag en av drivringarna.
2. Dra eller skjut bromsspaken (10) på det MOTSATTA hjulet tills du känner att bromsen låser sig.
3. Gör på samma sätt med bromsen på det andra hjulet.

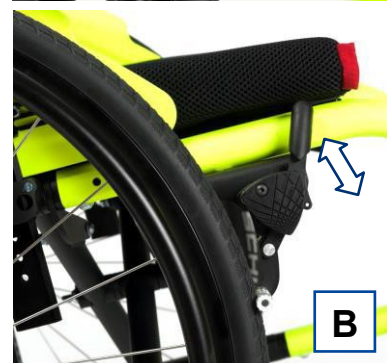

Sportbromsar

Sportbromsarna sitter under sitsen.

Gör så här för att frigöra bromsarna:

1. Fatta med ena handen tag i en av drivringarna.
2. Dra i bromsspaken på det MOTSATTA hjulet.
3. Gör på samma sätt med bromsen på det andra hjulet.

Gör så här för att ansätta bromsarna:

1. Fatta med ena handen tag i en av drivringarna.
2. Skjut bromsspaken på det MOTSATTA hjulet framåt tills du känner att bromsen låser sig.
3. Gör på samma sätt med bromsen på det andra hjulet.



3.2 Körhandtag (steglös justering)

Beroende på valt utförande kan din rullstol levereras utan körhandtag eller med normala eller fällbara körhandtag.

3.3 Armstöd/sidoskydd

Beroende på valt utförande kan din rullstol vara försedd med olika typer av sidoskydd eller armstöd:

- Fast sidoskydd utan armstöd
- Fast sidoskydd med armstöd
- Fällbara armstöd
- Avtagbara sidoskydd

3.4 Fällbart ryggstöd

Gör så här för att fälla ner ryggstödet på sitsen:

1. Dra varsamt upp bandet (20). Då öppnar sig säkerhetstapparna (21) i nedfällningsmekanismen.
2. Tryck ned ryggstödet på sitsen.

Gör så här för att fälla upp ryggstödet:

1. Ställ upp ryggstödet tills det snäpper på plats.
2. Kontrollera att båda säkerhetstapparna sitter ordentligt i hålen i mekanismen (21).
3. Kontrollera att ryggstödet sitter ordentligt på plats.



3.5 Tippskydd (tillval)

Tippskyddet hindrar din rullstol från att välta bakåt. När tippskyddet inte behövs kan du svänga det åt sidan genom att dra i den vertikala stängan (16) och att vrida den mot rullstolens framkant tills den snäpper på plats.

Gör så här för att anpassa tippskyddets höjd efter drivhjulens position och storlek:

1. Lossa stjärnknoppen (17) så att tippskyddets innerrör kan röra sig inne i fästet.
2. Skjut tippskyddet upp eller ned tills det är i önskat läge.
3. Dra åt stjärnknoppen (17).

Tippskyddet ska ligga cirka 15–20 mm över marken.




3.6 Avtagning och montering av fotstöd

Gör så här för att ta av fotstöden:

1. Lyft i spaken (22) på fotstödet.
2. Sväng fotstödet åt sidan.
3. Dra fotstödet ut ur sitt fäste (23).
4. Gör på samma sätt med det andra fotstödet.

Gör så här för att montera fotstöden:

1. Anbringa fotstödet i fästet (23) medan du håller fotstödet åt sidan i förhållande till rullstolen.
2. Sväng fotstödet in mot rullstolens framkant tills det snäpper på plats.
3. Gör på samma sätt med det andra fotstödet.

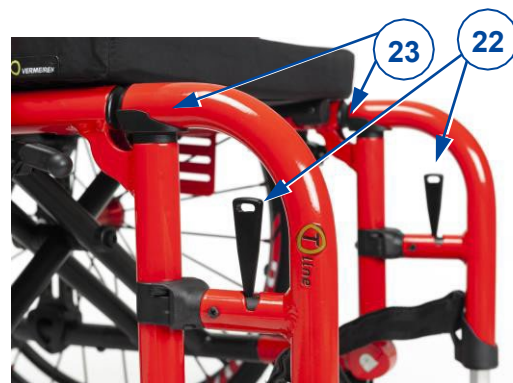

3.7 Komfortjusteringar

**FÖRSIKTIGT**


Risk för personskada och/eller materiell skada

- Följande komfortjusteringar kan utföras av rullstolsbrukarens assistent eller vårdare. Alla övriga justeringar ska utföras av fackhandlaren (se monteringsmanualen).
- Tänk på fotplattans svängradie. Se till att fotplattan inte svänger ut och skadar människor eller saker.
- Se till att dina fingrar, kläder, bälten eller smycken inte fastnar i hjul eller andra rörliga delar när du justerar rullstolen.

3.7.1 Ryggstödet bredd och spänning

Rullstolens ryggstöd har tre justerbara band med vilka ryggstödet bredd och flexibilitet kan anpassas efter behov.

1. Ta av ryggstödsklädseln från kardborrebanden.
2. Lossa kardborrebanden.
3. Dra banden i önskad position. Vart och ett av banden kan ha olika spänning så att ryggstödet stödjer brukaren rygg på bästa möjliga sätt.
4. Sätt klädseln tillbaka på ryggstödet. Börja framtill.
5. Säkerställ att kardborrebanden sitter ordentligt genom att trycka på klädseln med dina händer.
6. Kontrollera att alla banden sitter fast med kardborrefästen.

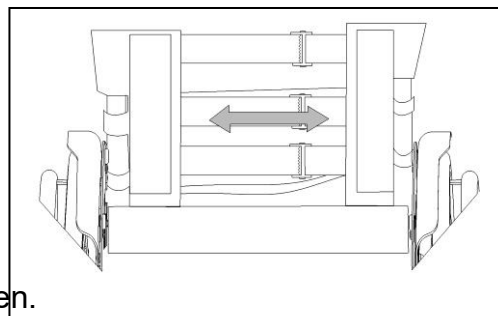

3.7.2 Ryggstödet höjd (stegvis justering)

1. Ta av ryggstödsklädseln.
2. Tryck ned fjäderknappen på baksidan av det ena ryggstödsröret.
3. Flytta ryggstödet upp eller ned till önskad höjd.
4. Säkerställ att fjäderknappen snäpper in i hålet i ryggstödsröret.
5. Gör på samma sätt på den andra sidan. Kontrollera att båda sidorna ligger på samma höjd och fjäderknapperna sitter i ordentligt.

3.7.3 Körhandtagens höjd (steglös justering)

Fästspak

1. Dra upp körhandtagets fästspak (40) för att öppna den.
2. Flytta körhandtaget upp eller ned till önskad höjd.
3. Tryck tillbaka fästspaken (40) för att låsa den.
4. Gör på samma sätt med det andra körhandtaget. Kontrollera att båda handtagen ligger på samma höjd och att de är ordentligt låsta.



Fästratt

1. Vrid körhandtagets fästratt (30) ett par varv moturs.
2. Flytta körhandtaget upp eller ned till önskad höjd.
3. Lås fästratten genom att vrida den medurs.
4. Gör på samma sätt med det andra körhandtaget. Kontrollera att båda handtagen ligger på samma höjd och att de är ordentligt låsta.





3.8 Förflyttning till och från rullstolen



FÖRSIKTIGT

Risk för personskada och materiell skada

- Om du är osäker på om du kan förflytta dig till och från rullstolen tryggt själv - be någon att hjälpa dig.
- Stå inte på fotplattan när du förflyttar dig till eller från rullstolen.

Förflytta sig

1. Placera rullstolen så nära som möjligt stolen, soffan eller sängen du vill förflytta dig till eller från.
2. Se till att båda bromsarna är aktiverade. Se §3.1.
3. Sväng ut fotstöden åt sidan och fäll upp fotplattorna för att du inte ska sätta fötterna på dem.
4. Flytta dig till eller från rullstolen själv eller med hjälp av din assistent eller ett lyftredskap.

Sitta rätt i rullstolen

1. Sätt dig så att din nedre rygg är så nära ryggstödet som möjligt.
2. Sväng in fotstöden tills de snäpper på plats och fäll ned fotplattorna.

3.9 Användning av rullstolen



FÖRSIKTIGT

Risk för personskada och materiell skada

- Kontrollera innan du börjar använda rullstolen:
 - att parkeringsbromsarna fungerar som de ska
 - att däcken är i bra skick (se kapitel 4).
- Akta så att dina fingrar inte hamnar mellan ekrarna.
- Kör inte rullstolen med blöta händer.
- Akta så att dina händer inte kommer i kläm när du kör i smala passager.
- Använd rullstolen INTE för att överkomma sluttningar, hinder, trappor eller trottoarkanter som överstiger vad som står i kapitel 5.
- Ansätt bromsarna när du stannar i en sluttning.
- Kontrollera att alla fyra hjul rör marken när kör upp- eller nedför en sluttning.
- Kör så sakta som möjligt i sluttningarna.
- Kör alltid på trottoaren när du använder rullstolen på offentliga gator.
- Håll ett öga på eventuella hål eller andra ställen i underlaget där hjulen kan fastna.
- Se upp för stenar eller andra föremål som kan utgöra ett hinder.
- Se till att fotplattorna inte tar i marken när du tar dig över ett hinder.
- Åk inte rulltrappa med rullstol.
- Använd alltid säkerhetsbälte om möjligt.
- Tänk på fotstödens svängradie. Se till att fotstöden inte svänger ut och skadar människor eller saker.
- Om du inte har erfarenhet av att köra rullstol be en assistent att hjälpa dig. Håll armarna borta från hjulen och håll fötterna på fotplattorna.
- Använd alltid två assistenter när du ska förflytta dig i trappor.
- Försök inte att komma upp eller ned för en trappa som inte är avsedd för rullstolar.

3.9.1 Köra rullstolen:

1. Frigör bromsarna.
2. Ta tag i högsta stället på båda drivringarna.
3. Luta dig framåt och skjut på drivringarna framåt tills armarna är utsträckta.
4. Sväng armarna tillbaka till toppen på drivringarna och upprepa påskjutningsrörelsen.

4 UNDERHÅLL

4.1 Regelbundet underhåll

**FÖRSIKTIGT**

Risk för personskada och materiell skada

Reparationsåtgärder och utbyte av delar av rullstolen ska utföras endast av yrkespersonal. Bara originalreservdelar från Vermeiren får användas.



Serviceintervallet beror på hur ofta och hur intensivt rullstolen används. Kontakta din fackhandlare för att avtala om tidplan för inspektion, underhåll och reparation.

Se Vermeirens webbplats www.vermeiren.com för underhållsmanual.

Alltid före användning:

Kontrollera följande:

- att alla delar sitter på plats och inte är skadade eller slitna
- att alla delar är rena (se 4.2.2)
- att hjulen, ryggstödet, sitsen, vadstöden, armstöden och fotplattorna sitter ordentligt på plats
- att hjulen och däcken är i bra skick (se 4.2.1)
- att inga ramdelar är deformerade, ostabila, försvagade eller sitter löst
- att sitsen, ryggstödet, armstöden, vadstöden eller huvudstödet (om monterat) inte är slitna eller skadade
- att bromsarna är oskadade och fungerar som de ska.

Kontakta din fackhandlare för eventuell reparation eller utbyte av del.

Med högst ett års mellanrum

Låt din fackhandlare inspektera och serva din rullstol minst en gång om året. Det minsta serviceintervallet beror på användningen av rullstolen och ska därför avtalas med dig och din fackhandlare.

4.2 Underhållsinstruktioner

4.2.1 Hjul och däck



Bromsarnas funktion påverkas av hur slitna och våta eller smutsiga (av vatten, olja, lera e.d.) däcken är. Kontrollera alltid däckens skick innan du använder rullstolen.

Håll hjulen rena och fria från sladdar, hår, sand och fiber.

Kontrollera däckens profil. Om mönsterdjupet är mindre än 1 mm ska däcken bytas ut. Kontakta din fackhandlare för utbytet.

Kontrollera att lufttrycket är korrekt i alla däck (se lufttrycksuppgifter på däcken).

4.2.2 Rengöring

FÖRSIKTIGT

Risk för fuktskada

- Använd aldrig en slang eller högtryckstvätt för att rengöra rullstolen.

Torka rullstolens styva delar med en fuktad (inte blöt) trasa . Vid behov kan du använda ett mildt tvättmedel som passar för lackade ytor och syntetiska textilier.

Klädseln kan rengöras med ljumt vatten och mildt tvättmedel. Använd inte skurmedel.



4.2.3 Desinfektion

FÖRSIKTIGT

Risk för skada

- Desinfektion får endast utföras av yrkespersonal. Kontakta din fackhandlare.

4.3 Felsökning

Även om du använder din rullstol på vederbörligt sätt kan tekniska problem uppkomma. Kontakta då din fackhandlare.



VARNING

Risk för personskada och materiell skada på rullstolen

- Försök ALDRIG reparera rullstolen själv.

Följande företeelser kan vara tecken på ett allvarligt problem. Skulle du upptäcka något av dem kontakta din fackhandlare.

- Ovanliga ljud hörs.
- Däcken uppvisar ojämnt slitage.
- Hjulen rullar ryckigt.
- Rullstolen drar sig åt ena hållet.
- Delar i hjulen är skadade.

4.4 Kassering


När rullstolen inte längre kan användas kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. Avmontera de avtagbara delarna för att underlätta transporten av återvinnbara delar.

5 TEKNISKA DATA

Den nedanstående tekniska informationen gäller endast denna rullstol med standardinställningar och vid optimala förhållanden. Beakta denna information när du använder rullstolen.

Nedan angivna värden gäller inte om rullstolen har ändrats, skadats eller blivit utsliten.

Tabell 1: Tekniska data

Märke	VERMEIREN	
Typ	Rullstol	
Modell	Trigo T	
		
Beskrivning	Specifikationer	
Maximal brukarvikt *i beställningsform 1,5-krysstag är möjlig med sitsbredd på 360 mm, och max. användarvikt 130 kg	Med sitsbredd på upp till 360 cm (enkelt krysstag): 70 kg Med sitsbredd på 380-460 cm (1,5-krysstag): 130 kg * Med sitsbredd på 480-500 cm (dubbelt krysstag): 130 kg	
Statisk stabilitet	5°	
Mått	Min.	Max.
Totallängd	676 mm	1046 mm
Längd med hjulen avmonterade	650 mm	855 mm
Bredd med hjulen avmonterade	386 mm	586 mm
Höjd nedfälld (beroende på hjulens diameter)	457 mm	660 mm
Totalhöjd (beroende på drivhjulstyp, justeringar, körhandtag och ryggstödshöjd)	457 mm	945 mm
Höjd nedfälld utan hjul	Max. 428 mm	
Sitsbredd	300 mm	500 mm
Totalbredd (24" drivhjul, 0° camber):	460 mm	660 mm
Totallängd (beroende på sitsdjup, drivhjulstyp, fotplattstyp och justeringar)	676 mm	1046 mm
Sitsklädseldjup – sittedjup	320 mm	500 mm
Ryggstödshöjd, justerbar	(i steg om 25 mm)	
Icke-nedfällbar	250 - 300	
Icke-nedfällbar	300 - 350	
Nedfällbar	350 - 400	
Nedfällbar	400 - 450	
Nedfällbar	450 - 500	



Ryggstödshöjd, fast, nedfällbar	(i steg om 20 mm) 250 – 510 mm
Sitshöjd vid sitsens framkant beroende på länkhjul 3" länkhjul 4" länkhjul 5" länkhjul 6" länkhjul	(i steg om 10 mm) 380 - 470 390 - 490 410 - 500 430 – 510
Sitshöjd vid sitsens bakkant beroende på drivhjul 18" drivhjul 20" drivhjul 22" drivhjul 24" drivhjul 26" drivhjul	(i steg om 10 mm) 315 – 415 335 - 435 355 – 465 385 – 495 405 - 515
Avstånd mellan sidoskydd/stänkskärm och sits	0 mm
Avstånd mellan fotplatta och sits	240 – 460 mm
Fotstödslängd, justerbar	240 – 460 mm
Sitsvinkel, justerbar	20°
Vinkel mellan sits och fotstöd	Fast: 70°, 80° eller 90°
Vinkel mellan fotplatta och fotstöd	20° (i steg om 5°)
Vikter	
Totalvikt	12,3 kg
Tyngst del (utan sits- och ryggstödsklädsel och hjul)	7,2 kg
Vikt av avtagbara delar:	
Hjul 24"	3,1 kg
Ryggstödsklädsel	0,4 kg
Sitsklädsel	0,4 kg
Fotstöd med fotplatta	0,65 kg
Körhandtag (justerbara)	0,4 kg
Hjul	
Drivhjulens camber-vinkel (standard, justerbar)	0° 2° 4° 6°
Länkhjul	3" - 4" - 5" - 6"
Drivhjul	18" - 20" - 22" - 24" - 26"
Drivringsdiameter	400 mm – 440 mm – 500 mm – 535 mm – 600 mm
Däcktryck, drivhjul	2.5 - 10 bar
Användningsmiljö	
Hållfasthetstestad enligt	ISO 7176-8
Klädselns brandsäkerhet enligt	ISO 7176-16



Förvarings- och användningstemperatur	+5 °C ~ +41 °C
Förvarings- och användningsfuktighet	30% ~ 70%
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Mätningstolerans ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	



Utförd service

Denna produkt (namn):

har inspekterats (I), servats (S), reparerats (R) eller desinfekterats (D):

Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:
Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:
Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:
Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:
Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:	Av (stämpel): Utförd åtgärd: I / S / R / D Datum:



Vermeiren GROUP NV
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

webbplats: www.vermeiren.com

Anvisningar för fackhandlaren

Denna bruksanvisning är en viktig del av produkten och ska därför medfölja varje produkt.

Version B, 2019-11

Alla rätter förbehållna. Detta gäller även översättningen.

Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras i någon form eller på något sätt (tryck, fotokopia, mikrofilm eller annan process) utan skriftligt medgivande från utgivaren. Den får inte heller bearbetas, kopieras eller spridas med hjälp av elektroniska system.