



REHASENSE

more than mobility

PONDUS

Pyörätuolirampit

Käyttöohje



CE

Yleistä

Hyvä asiakas,

Tämä käyttöohje sisältää lääkinällisen laitteen kuvauksen sekä tärkeät ohjeet, jotta tuotteen käyttö on oikeanlaista ja turvallista. On tärkeää, että luet käyttöohjeen huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

On erityisen tärkeää lukea turvallisuusvaatimukset ja noudattaa niitä.

Rehasense kehittää tuotteitaan jatkuvasti, joten se pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

1 Indikaatiot & käyttötarkoitus

Rampit ovat lääkinällisiä laitteita, joita käytetään ainoastaan avustamaan pyörätuoli- tai sähkömopopotilaita. Ne mahdollistavat kulkemisen eri tasojen välillä avustajan kanssa tai ilman avustajaa. Rampit mahdollistavat täten pyörätuolissa istuvien pääsyn tai lähtemisen rakennuksiin/rakennuksista tai kulkuneuvon/kulkuneuvosta. Rampeja voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Muunlainen käyttö on kiellettyä

2 Turvallisuusohjeet

Varmista, että kaikki tuotteen käyttäjät lukevat käyttöohjeen. Valmistaja ei ota vastuuta mistään vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat siitä, että käyttöohjeita ei olla noudatettu.



Käyttörajoitukset:

- Käytä vain moitteettomassa kunnossa olevaa tuotetta.
- Jos havaitset vikoja tai puutteita, ota välittömästi yhteys jakelijaan.
- Huomioi tuotetarrassa olevat tiedot.
- Varmista, että kaikki tuotetta käyttävät lukevat tämän käyttöohjeen. Vahinkoja, jotka johtuvat siitä, että käyttöohjeita ei olla noudatettu, ei korvata.
- Älä kuormita rampeja yli sallitun maksimikuormituksen, joka on kirjattu teknisiin tietoihin sekä tuotetarraan.
- Jokaista ramppia voidaan käyttää sillä suurimmalla kallistuskulmalla ja nousukorkeudella, joka on ilmoitettu sivun 5 teknisissä tiedoissa. Älä ylitä ilmoitettuja arvoja.
- Käytä ramppia ainoastaan siihen, mihin se on tarkoitettu.
- Älä tee mitään muutoksia ramppiin, ellei muutokseen ole valmistajan kirjallista lupaa.
- Kun laitat rampin kasaan, varo ettei sormet tai muut ruumiinosat jää puristuksiin.
- Ramppia saa käyttää ainoastaan tukevalla alustalla.



Ole varovainen, kun näet tämän symbolin laitteessa. Käyttäjän tai avustajan sormet tai muut ruumiinosat voivat jäädä laitteen elementtien väliin tuotetta koottaessa, kasattaessa tai säätäessä. Ole erityisen varovainen säätäessäsi tuotteen ominaisuuksia. Huomioi tuotteen elementtien välisten rakojen mitat, jotta vältät sormien tai muiden ruumiinosien puristumisen tai jäämisen jumiin.

3 Toimitus & tuotteen yleiskuvaus

Pondus rampit on valmistettu korroosion kestävästä profiilialumiinista. Tuote koostuu aina ramppi pari setistä: Joko 2 yksiosaista ramppia tai 2 kaksi- tai kolmiosaista, kokoontaitettavaa tai teleskooppiramppia. Ramppien pinta on päällystetty erityisellä liukastumista estävällä materiaalilla.

Yleistarkistus:

Rampit toimitetaan pahvilaatikoissa kokoonlaitettuna – helpomman kuljetuksen vuoksi.


Sisältö:

- 2 ramppia
- 1 käyttöohje

Ensimmäisenä ota tuote ulos laatikosta ja tarkista listasta, ettei mitään puutu. Jos huomaat tässä vaiheessa, että jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, älä jatka kokoamisprosessia. Ota heti yhteyttä tuotteen jakelijaan.


4 Käyttö

Kokoonlaitettavat rampit (1100F2, 1500F2, 2000F2)

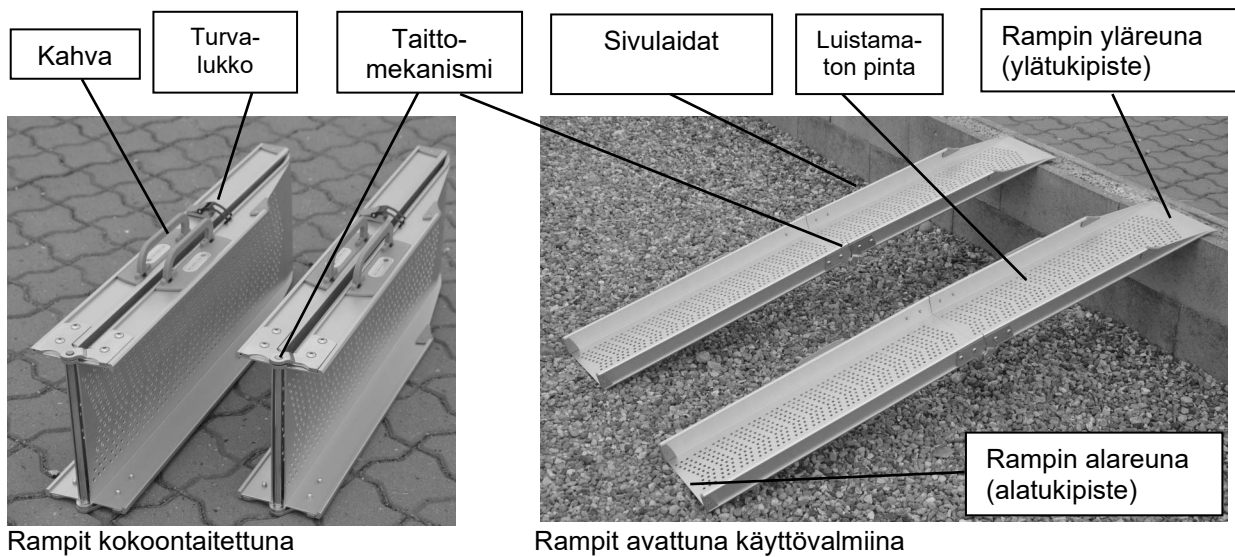


- Avaa rampit avaamalla turvalukko ja taittamalla ramppien puoliskot auki.
- Kokoa rampit taittamalla puoliskot takaisin kasaan ja lukitse turvalukko.

Teleskooppirampit (1200T2, 2000T2, 2000T3, 2900T3)

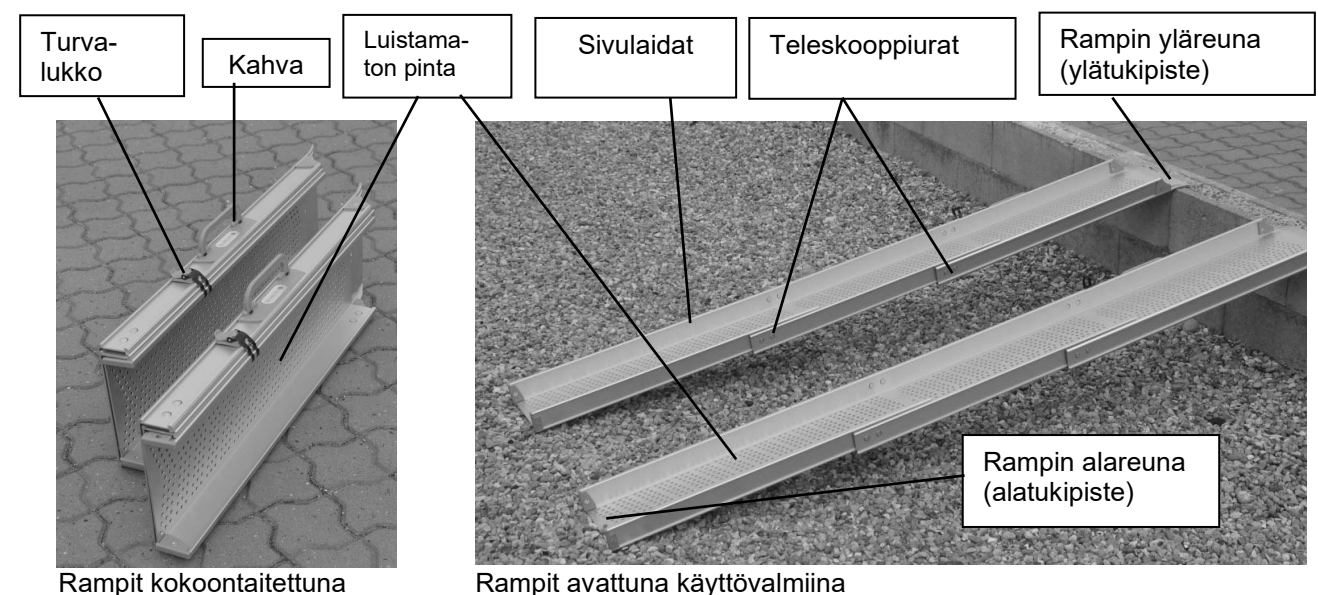

- Avaa ramppi avaamalla tuotteen sivulla oleva turvalukko ja vedä rampin päistä pidentääksesi rampeja käyttövalmiiseen asentoon.
- Kokoonpainuminen on estetty käytön aikana itselukitusmekanismilla.
- Kokoa ramppi työntämällä rampin molemmista päistä ja liu'uta rampin osiot takaisin sisäkkäin teleskooppikiskoon lyhentääksesi sitä. Lukitse tuotteen sivussa oleva turvalukko.

Kokoontaitettavat-teleskooppirampit (2770FT3)

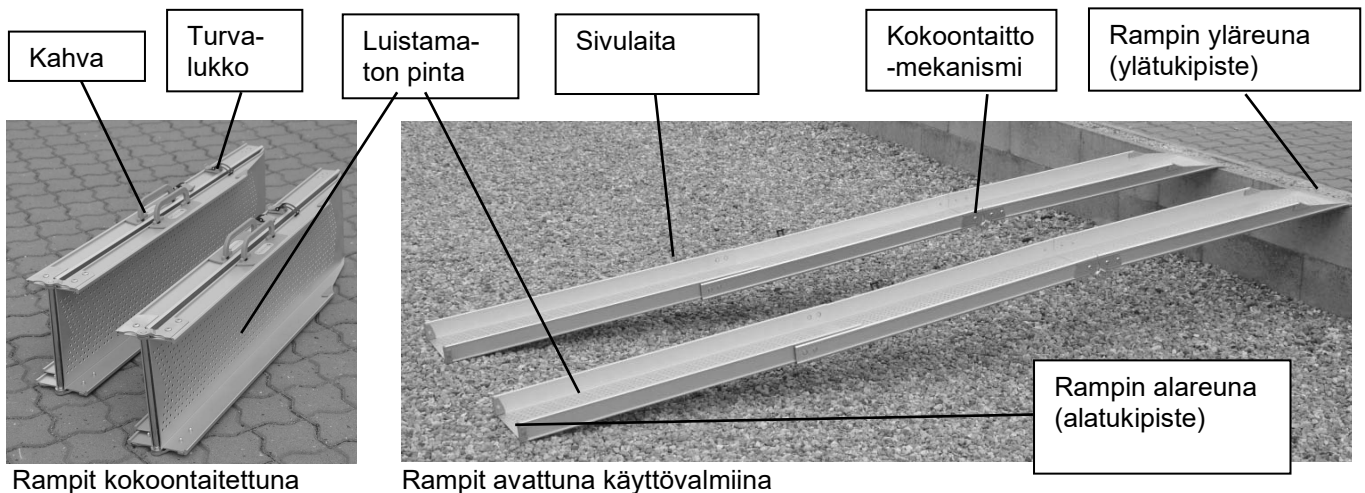

- Avaa ramppi avaamalla tuotteen sivulla oleva turvalukko
- Avaa ramppien kokoontaitetut puoliskot auki ja vedä rampin päistä pidentääksesi teleskooppiosiot käyttövalmiiseen asentoon.
- Sulje ramppi työntämällä teleskooppiosio takaisin sisäkkäin ja taita kokoontaittavat osiot takaisin kasaan. Lukitse turvalukot.

Yleiset käyttöohjeet:

- Rampeissa on 2 sivulaitaa molemmin puolin, jotka estävät rampista putoamisen sivuttaissuunnassa.
- Rampissa on 2 tukipistettä:
 - Ylätukipiste (rampin yläreuna) tulee aina asettaa esteen päälle, jota ylitetään.
 - Alätukipiste (rampin alareuna) tulee aina asettaa matalimpaan tasaiseen kohtaan ennen ylitettävää estettä.
- Rampit pitää asentaa aina vakaalle alustalle.
- Ramppiparin molemmat parit tulee asettaa aina rinnakkain samaan asentoon. Ks. kuva.
- Tarkista, että rampit ovat tukevasti paikallaan ennen rampin käyttöä.



5 Kuljetus

Pondus rampit voidaan helposti taittaa kasaan ja lukita kuljetusta varten. Varmista aina, että ramppi on kuljetuksen aikana turvallisesti kiinnitetty ja suojattu tahattomilta liikkeiltä.

6 Tekniset tiedot

Tuote no.	Tyyppi	Max pituus (mm)	Sisäosan leveys (mm)	Max nousukyky (tasoero) (mm)	Max kuormitus / pari (kg)	Paino / pari (kg)
PS00550	550S	550	210	110	400	2,9
PS01170	1200S	1170	210	230	400	5,8
PF01100	1100F2	1100	210	220	400	7,1
PF01500	1500F2	1500	210	300	400	9,2
PF02000	2000F2	2000	210	400	300	11,7
PF201190	1200T2	1190	195	240	350	7,3
PT202030	2000T2	2030	195	400	300	11,3
PT301990	2000T3	1990	180	400	300	12
PT302890	2900T3	2890	180	580	250	16,2
PFT32770	2800FT3	2770	195	600	250	16,6

7 Tuotetarra

Tuotetarra sijaitsee tuotteen sivulla.

Pondus ramps / Rampen	
Type/Typ: 1100 F2 Max load/Belastung: 200kg/pcs Max.Step/Max Steigerung: 22 cm Item no./Art.Nr.: PF201100	REHASENSE Sp. z o.o. Sulejowska 45 97-300 Piotrków Tryb. Poland www.rehasense.com
SN  	
2013 22 PF201100 003	

8 Pesuohjeet

- Puhdista tuote säännöllisesti ja pidä se puhtaana.
- Kevyempi lika ja pöly voidaan poistaa märällä liinalla.
- Suuremmat liat voidaan poistaa syövyttämättömällä, miedolla pesuaineella ja vedellä.
- Älä käytä voimakkaita hankausaineita tai valkaisuainepohjaisia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintoja.
- Kuivaa osat pehmeällä liinalla.

9 Huolto

Rampit ovat periaatteessa huoltovapaita, mutta on suositeltavaa tarkistaa aina ennen käyttöä, että liukastumista estävä pinta ei ole likainen tai repeytynyt. Jos epäilet rampin teknistä kuntoa, lopeta sen käyttö ja ota yhteys jälleenmyyjään. Tukevasta rakenteesta ja kestävien materiaalien käytöstä huolimatta tuote on kuluva. Siksi on suositeltavaa, että ammattilainen tarkastaa tuotteen säännöllisin väliajoin.

- Tarkista, että kaikki mutterit ja pultit, pidikkeet ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
- Vaihda rikkiäiset, vaurioituneet tai kuluneet osat välittömästi.
- Harjaa lika ja roskat luistamattomalta pinnalta jäykällä harjalla.
- Pidä pinnat puhtaina pyyhkimällä kostealla liinalla.

10 Tuotteen hävitys

Tuotetta ei saa hävittää normaalin sekajätteen mukana.

Tuote on toimitettava jäteasemalle uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

11 Takuu

Valmistaja tarjoaa 2 vuoden takuun valmistusvirheille. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat muusta, kun valmistajan määrittämästä tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Teknisissä ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen myyjääsi:

Myynti Suomessa:

CAMP MOBILITY
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Rehasense® Europe

Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Polen

Rehasense® Europe

Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands

www.rehasense.com
info@rehasense.com