




KÄYTTÖOHJE

Suihku-/WC-tuoli, kelattava

Tukeva, suihku-/WC-tuoli kelauspyörillä, joka tukee käyttäjän itsenäisempää toimintaa. Säädetävät jalkatuet mahdollistavat istuma-asennon, jossa jalat ovat loitontuneina. Sopii erityisesti käyttäjille, joilla on runsaasti kudosta reisien sisäpuolella.

Kelattavaa suihku-/WC-tuolia käytetään hoitokodeissa, laitoksissa ja sairaaloissa. Käyttäjän maksimipaino 325 kg.

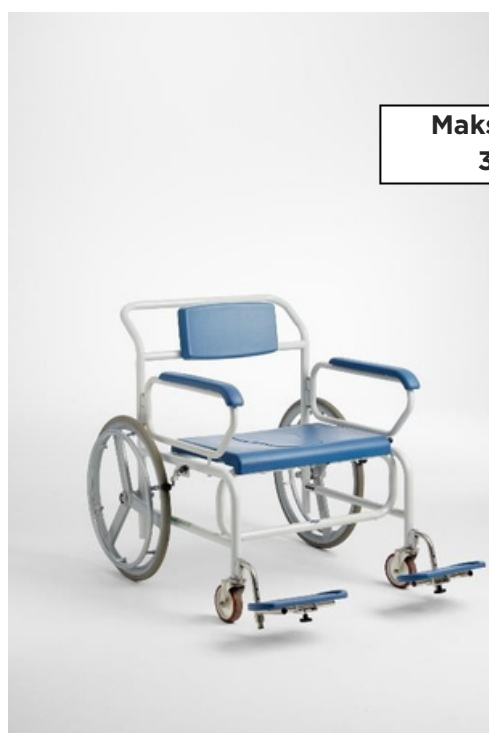

**Maksimipaino
325 kg**

- Kelattava suihku-/WC-tuoli varmistaa hoitajalle paremman työergonomian sekä käyttäjälle mukavan ja turvallisen peseytymiskokemuksen.
- Valinnaiset, extra-leveät perhoskäsituet
- Saatavilla kahdessa koossa: 61 cm ja 71 cm
- Jarrut molemmissa takapyörissä
- Takapyörät parantavat käyttäjän itsenäisyyttä.
- Erikoispitkät käsituet ja useita erilaisia jalkatukivaihtoehtoja



Scan the QR-code and find the product on the Danish AssistData.



Cobi Rehab and Cobi Rehab suppliers comply with the UN conventions on child labour and forced labour as well as ILO 029, C132 and C182.

Sisällysluettelo

1. Turvallisuusohjeet	3
2. Symbolit	4
3. Yleisiä huomioita	5
4. Käyttö	5
5. Käyttöönotto	6
6. Puhdistus ja huolto	7
7. Kuljetus ja säilytys	7
8. Hävittäminen	8
9. Takuu	8
10. Tekniset tiedot	9
11. Lisävarusteet ja varaosat	10

1. Turvallisuusohjeet



VAROITUS

Älä käytä suihku- ja WC-tuolia ilman perusteellista opastusta koulutetulta henkilökunnalta tai henkilöltä, joka on saanut ohjeistuksen laitteen käytöstä. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vammoja käyttäjälle.

Suihku- ja WC-tuolin käyttäminen henkilöille, joiden paino ylittää 325 kg:n maksimikäyttäjäpainon lisää riskiä vaurioittaa laitetta.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen suihku- ja WC-tuolin käyttämistä. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin, jotka on merkitty  symbolilla.

Cobi Rehab ei ota vastuuta tuotteen vahingoittumisesta tai henkilövahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, kiinnityksestä tai käytöstä.

Ota välittömästi yhteyttä Cobi Rehabiin, jos osia puuttuu tai ne ovat vaurioituneet. Älä koskaan käytä muita kuin tuotteeseen kuuluvia varaosia.

Cobi Rehab ei ole vastuussa virheistä tai onnettomuuksista, jotka tapahtuvat korjausten jälkeen ilman Cobi Rehabin kirjallista lupaa.



TURVALLISUUSOHJEET

Tässä käyttöohjeessa symboli  ilmaisee turvallisuusohjeen. Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti.

Nosta aina suihku- ja WC-tuoliin ja siitä pois käyttäjät, jotka eivät pysty seisomaan ja kävelemään.

Suihku- ja WC-tuolin suurin sallittu käyttäjäpaino on 325 kg.

Laitteen pintalämpötila voi nousta ulkoisten lämmönlähteiden, kuten auringonvalon, vaikutuksesta.

Suihku- ja WC-tuolia saa käyttää vain tasaisella, kovalla lattiapinnalla, jonka kaltevuus on enintään 3°. Suurempi kaltevuus lisää kaatumisriskiä.

Älä koskaan seiso jalkalautojen päällä tai käytä niitä alustana siirtojen aikana. Tämä aiheuttaa suuren kaatumisvaaran.

Molemmat pyörät on lukittava, kun käyttäjä istuu tuolissa. Poikkeuksena silloin, kun tuolia käytetään kuljetukseen.

Pulttien ja lukkomutterien tarkastamatta jättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Huollon laiminlyönti voi vaurioittaa tuotetta, lyhentää sen käyttöikää tai heikentää suihku- ja WC-tuolin toimintaa.

Muista aina desinfioida suihku- ja WC-tuoli, kun se siirretään uudelle käyttäjälle riskikontaminaation ja infektioiden ehkäisemiseksi.

2. Symbolit

Tässä käyttöoppaassa ja/tai tuotteen etiketissä käytetään seuraavia symboleja:	
	Varoitus!
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus, Medical Device Regulation (MDR), EU 2017/745
	Cobi tuotenumero
	Sarjanumero
	Valmistusvuosi
	Valmistaja
	Lääkinnällinen laite
	Max. käyttäjäpaino
	Tutustu käyttöohjeeseen
CE-merkintä sijaitsee rungossa. Esimerkki CE-merkistä on nähtävissä alla.	

 Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			 	
	Shower commode wheel, 61cm		 325 KG	
	0152-061-000		MADE IN TAIWAN	
	0050821			
	2020			(01)05740000101608(21)0050821

3. Yleisiä huomioita

Tämä käyttöopas sisältää tärkeää tietoa kelattavan suihku-/WC-tuolin käytöstä sekä kohderyhmästä, jolle tuote on tarkoitettu. Oppaassa on myös paljon tuotteen teknisiä tietoja.

Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla verkkosivustollamme. Tarkista, onko lukemasi versio ajan tasalla.

Jos tarvitset käyttöoppaan isommalla fonttikoolla, tuote-esite on saatavilla PDF-muodossa osoitteessa cobirehab.com, ja sen kokoa voi suurentaa tarpeen mukaan.

Voit aina ottaa yhteyttä Cobi Rehabiin numerossa +45 7025 2522 tai cobi@cobi.dk, jos haluat lisätietoa kelattavasta suihku- ja WC-tuolista.

Cobi Rehab pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Kelattavan suihku-/WC-tuolin UDI-numero löytyy rungon sivussa olevasta tarrasta.

Tuoteturvatiedotteet ja mahdolliset takaisinvetotiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme.

4. Käyttö

Kelattava suihku-/WC-tuoli on suunniteltu helpottamaan baritatrinen henkilön siirtymisiä kylpyhuoneeseen/-huoneesta, pesutilanteisiin sekä WC-käyttöön.

Laite parantaa käyttäjän itsenäisyyttä. Se on tarkoitettu sisäkäyttöön esimerkiksi sairaaloissa, hoivakodeissa ja laitoksissa.

Kelattava suihku-/WC-tuoli on kehitetty enintään 325 kg painavilla käyttäjille, joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt.

 Suurin sallittu käyttäjäaino on 325 kg

 Kelattavaa suihku-/WC-tuolia ei ole tarkoitettu esteiden, kuten kynnyksien, ylittämiseen. Tuolia tulee käyttää vain kovalla ja tasaisella alustalla, jotta kaatumisriski vältetään.

Tarkoitettu käyttäjä (operaattori) on terveydenhuollon ammattilainen, kuten terapeutti, sairaanhoitaja tai sosiaali- ja terveysalan työntekijä.

Kelattava suihku-/WC-tuoli soveltuu käytettäväksi ympäristössä, jossa lämpötila on 0 - 40°C ja ilmankosteus 20 - 80 %.

 Laite ei sovellu käytettäväksi suolaisissa ympäristöissä (esimerkiksi uima-altaissa) eikä erittäin happamissa tai emäksisissä olosuhteissa.

Vasta-aiheet:

Valvo käyttäjiä, joilla on kognitiivisia häiriöitä, tuotetta käytettäessä.

5. Käyttöönotto

Ennen käyttöä

Käsituet on asennettava kunnolla suihku-/ WC-tuolin sivuilla oleviin kiinnityspaikkoihin.

Varmista, että istuin on oikein kiinnitetty tuolin runkoon.

Käyttäjän putoamisriskin estämiseksi älä koskaan käytä laitetta ilman asianmukaisesti asennettuja käsitukia.



Suihku-/WC-tuoli perhoskäsituilla

Käytön aikana

⚠ Älä koskaan seiso jalkatukien päällä tai käytä niitä askelmana siirtymisten aikana. Tämä aiheuttaa suuren kaatumisriskin.

Puristumisvaara ⚠

- Käsitukien asentaminen käyttäjän istuessa suihku-/WC-tuolissa voi aiheuttaa puristumisvaaran käsitukien ja tuolin sivujen väliin.

- Suihku-/WC-tuolin istuinrungon sekä WC-istuimen tai alusastian välillä on olemassa puristumisvaara sormille ja muille ruumiinosille.

⚠ Molemmat pyörät on lukittava, kun käyttäjä istuu suihku-/WC-tuolissa, poikkeuksena silloin, kun tuolia käytetään kuljetukseen.



Istuin aukon kannella



Alusastia on helppo asettaa paikoilleen ja tyhjentää

6. Puhdistus ja huolto

Suihku-/WC-tuolin runko, istuin ja käsituot on pestävä jokaisen käyttökerran jälkeen kalkki- ja suolaneutraalilla vedellä ja tavallisella puhdistusaineella. Puhdistuksen jälkeen pinnat on kuivattava huolellisesti.

⚠ Suihku-/WC-tuolia ei saa käyttää suolaisissa ympäristöissä (kuten uima-altaissa) eikä voimakkaasti happamissa tai emäksisissä olosuhteissa.

Desinfiointi:

Istuin voidaan irrottaa ja desinfioida käyttämällä etanolia (70-85 %) tai klooripohjaista valmistetta, jonka pitoisuus on vähintään 1000 ppm ja enintään 10 000 ppm.

⚠ Muista aina desinfioida suihku-/WC-tuoli, kun se siirretään uudelle käyttäjälle riskikontaminaation ja infektioiden välttämiseksi.

Paikallisia puhdistus- ja desinfiointiohjeita on noudatettava aina.

Suihku-/WC-tuoli voidaan pestä kaappipesukoneessa.

⚠ Pulttien ja lukkomutterien tarkastamatta jättäminen voi johtaa toimintahäiriöihin.

7. Kuljetus ja säilytys

Kun suihku-/WC-tuolia ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa, jonka lämpötila on -10 ja +40 °C välillä.

Suihku-/WC-tuolia voidaan kuljettaa maa- ja ilmateitse (ilman käyttäjää). Sitä ei voida taittaa kokoon, koska runko on kiinteä.

Välttääkseen esimerkiksi selkävammoja hoitohenkilökunnan ei tule kantaa 33 kg painavaa suihku-/WC-tuolia.

Mikäli suihku-/WC-tuolia tarvitsee kuljettaa, se voidaan nostaa rungosta moottoriajoneuvoon, ilman, että käyttäjä istuu tuolissa.

7.1 Pitkä-aikainen säilytys

Kun suihku-/WC-tuolia säilytetään pidemmän aikaa (yli kolme kuukautta), säilytä se lämpötilassa 0-40 °C, ja ilmankosteudessa, joka ei ylitä 80%.



Molempien takapyörien seisontajarrut voidaan aktivoida sekä käyttäjän että henkilökunnan toimesta

8. Hävittäminen

Hävitä käytöstä poistetut tuotteet ympäristöystävällisellä tavalla.

Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai Cobi Rehabiin saadaksesi lisätietoa hävittämisestä.

Kierrätys

Ota yhteyttä Cobi Rehabiin saadaksesi lisätietoa suihku-/WC-tuolin osien kierrätyksestä.

9. Takuu

Cobi Rehab takaa, että suihku-/WC-tuoli on virheetön toimitushetkellä. Jos tuote kuitenkin poikkeuksellisesti on viallinen tai siinä ilmenee puutteita vastaanoton yhteydessä, ota välittömästi yhteyttä Cobi Rehabiin.

Suihku-/WC-tuolin takuu on voimassa yhden vuoden ostopäivästä alkaen ja kattaa valmistusvirheet sekä vastaanotettaessa havaitut viat. Lasku toimii takuutositteena.

Takuu ei koske seuraavia:

- tuotteita, joista sarjanumero, eränumero tai vastaava on poistettu tai vahingoittunut merkittävästi
- tuotteita, joita on korjattu valtuuttamattoman henkilön toimesta

Takuu ei kata:
- kuluvia osia

Takuu ei ole voimassa, mikäli Cobi Rehab arvioi, että suihku-/WC-tuolia on käytetty virheellisesti tai sitä on käytetty suolaisessa, happamassa tai emäksisessä ympäristössä.

Virheellisestä käytöstä aiheutuneista vaurioista laskutetaan sekä huoltotyö että käytetyt varaosat.

 Huollon laiminlyönti voi vaurioittaa tuotetta, lyhentää sen käyttöikää tai heikentää sen suorituskykyä.

9.1 Odottamaton tapahtuma

Ilmoita kaikista suihku-/WC-tuolin käyttöön liittyvistä tapahtumista Cobi Rehabille.

9.2 Odotetun käyttöiän päättymisen jälkeen

Odotetun käyttöiän päättymisen jälkeen on tärkeää tehdä tuotteesta kokonaisvaltainen arviointi ennen käytön jatkamista.

Odotetun käyttöiän päättymisen jälkeen Cobi Rehab ei voi taata tuotteen soveltuvuutta ja turvallisuutta, koska Cobi Rehabilla ei ole valvontaa tuotteen käytön tai kulumisen suhteen.

Tuotteen kokonaisarviointi on tehtävä pätevän ammattilaisen toimesta, ja arvioinnissa on vähintään otettava huomioon, miten tuotetta on käytetty, sekä tuotteen ja sen osien kunto.

Cobi Rehab voi aina suorittaa tällaisen arvioinnin.

10. Tekniset tiedot

Enimmäiskäyttäjäpaino	325 kg
Riskiluokka	I
Basic UDI DI	5740000100004N2
Tuotteen odotettu käyttöikä	7 vuotta
Kokonaispituus	1290 mm
Istuinleveys vakiokäsitukien kanssa	610/710 mm
Kokonaisleveys vakiokäsinojien kanssa (ilman jalkatukia)	810/910 mm
Istuinleveys perhoskäsituilla	750/850 mm
Kokonaisleveys perhoskäsituilla (ilman jalkatukia)	870/970 mm
Istuinsyvyys	560 mm
Istuinkorkeus	550 mm
Leveys käsitukien välissä	60 mm
WC-aukon leveys	Ø 240 mm, 350 mm pitkä
Etäisyys maasta istuimen alareunaan	445 mm
Etäisyys maasta työntökahvaan	1000 mm
Etäisyys maasta selkäosan yläreunaan	450 mm
Etäisyys istuimesta jalkatukiin	400/420/440/460/480 mm
Kokonaispaino (koot 61 cm/71 cm)	33 kg
Sivulle kääntyvät käsituet	Kyllä
Sivulle kääntyvät, korkeussäädettävät jalkatuet	Kyllä
Jalkatuet (materiaali)	PU-vaakto
Pyörä seisontajarrulla	Kyllä, kaksi kappaletta
Kääntösäde	1580 mm
Runko	Powder lacquered chromium molybdenum steel
Pyörät	Ø125 mm, kaksi kappaletta
Takapyörät	24" täyskumipyörät, puhkeamattomat, kaksi kappaletta
Istuin/selkäosa/käsituet	Polyuretaani
IP-luokitus	IPX4
ISO-luokitus	09 12 03 24
Riskinarviointi	EN/ISO 14971:2012
Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät	EN 12182

11. Lisävarusteet ja varaosat

Lisävaruste	Tuotenumero
Perhoskäsituki, oikea (lisää 7 cm leveyttä käsitukien välille)	0150-999-012R
Perhoskäsituki, vasen (lisää 7 cm leveyttä käsitukien välille)	0150-999-012L
Istuin suihku-/WC-tuoliin, 61 cm	0150-999-022
Istuin suihku-/WC-tuoliin, 71 cm	0150-999-023
Alusastia kannella	0140-999-001
Vakiojalkatuki, oikea puoli	0156-999-090H
Vakiojalkatuki, vasen puoli	0156-999-090V
Sivuttainen jalkatuki, oikea puoli	0156-999-030
Sivuttainen jalkatuki, vasen puoli	0156-999-031



COBI REHAB



MANUFACTURER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
+45 7025 2522
cobirehab.com