



# Lignorim kelausvanteet

## Lignorim® puukelausvanteet - pitää kädet lämpiminä!

Lignorim -kelausvanteet tuntuvat mukavalta ja lämpimältä kädessä kylmälläkin säällä ja ovat luonnonmukaista - ei allergisoivaa - puupuristelaaminaattia, joka ei jätä tikkuja käteen.

Camp Mobilityllä varastomallina 24" värit vaalea luonnonvärinen puu tai tumma puu. paksulla, ovaalinmuotoisella BIG-oteprofiililla.

Otemallit: LIGHT, MEDIUM, BIG ja PRIME.  
Valmistajan vakiovärit: Natur, Dark ja Intence Black. Tilauksesta Pop-Up värit: Vihreä, pinkki, vaaleanpunainen, punainen, oranssi ja turkoosinsininen. Vakiokoko: 24"  
Muita kokoja tilauksesta: 20", 22", 25", 26", 28"  
Kiinnitys 6-piste latta- ja/tai ruuvi kiinnityksellä mallista riippuen.

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**



## Ominaisuudet

Natur



Varastomalli

Dark



Varastomalli

Intense  
Black



## Lignorim® puiset kelausvanteet valmistetaan käsityönä Itävallassa

Lignorim® kelausvanteet tuntuvat käyttäjälle mukavammilta kuin metalliset, kylmät ja liukkaat alumiinikelausvanteet. Varsinkin kylminä vuodenaikoina metalliosien kosketus ja siihen liittyvä käsien jäätyminen on melko epä mukavaa. Lisäksi puupinta antaa paremman tarttuvuuden perinteisiin metallisiin kelausvanteisiin verrattuna. Puiset kelausvanteet valmistetaan käsityönä Glaneggissa Itävallassa.

## Materiaali kerroksittain laminoitua puupuristemateriaalia

Kerroksittain laminoitua puupuristemateriaalin ansiosta vanteista ei irtoa puutikkuja, joista aiheutuisi loukkaantumisvaaraa.

## Laminointikerrokset pitää rakenteen vakaana

Laminointikerrokset pitää vanteen poikkeileikkauksen tasaisen paksuna, joka pysyy mitoiltaan samanvahvuisena ja vakaana - myös suorassa kosketuksessa veden kanssa.

## Liuotin vapaa allergiaystävällinen pintakäsittely

Kelausvanteiden pinta on käsitelty vettä ja lämpöä kestäväällä väriöljyllä. Väriöljy on täysin liuotin vapaa ja suojaa siten ympäristöäsi ja terveyttäsi!

## Kestää hyvin vettä, lunta, kuraa ja kosteutta

Laminointikerroksista koostuva puumateriaali ja pintakäsittely luonnonmukaisella öljyllä suojaa puuvanteita tehokkaasti kosteudelta ja lialta. Voit käyttää niitä tavalliseen tapaan myös lumessa, sateessa ja kurassa.

Vakiovärit:  
(Intense Black tilauksesta)





BIG Ø 20 x 30 mm



BIG

Varastomalli

PRIME Ø 25 x 30 mm



Prime

MEDIUM Ø 20 x 24 mm



Medium

LIGHT Ø 20 mm



Light

Pop-Up-tilausvärit:

### Lignorim BIG - paksu ovaali oteprofiili

**BIG** -malli on ovaalimuodoista suurin ja sen poikkileikkaus on 20x30 mm. Suurempi profiilimuoto tarjoaa suuremman tarttumapinnan kuin Light- ja Medium-malleissa. Tämä vähentää vastusta ja lisää tehoa ja tehokkuutta kelattaessa. Tämä muoto myös mahdollistaa paremman hallinnan jarrutuksessa.

**Koot:** 22", 24", 25", 26"

**Värit:** 3 vakioväriä ja 6 popup-väriä

**Kiinnitys:** 6-piste: latta- tai ruuvikiinnitys

**Suosittelun käden koko:** keskikokoinen tai iso

### Lignorim PRIME - muotoiltu oteprofiili

**PRIME** -malli on ainutlaatuinen optimaalisen ergonomisen muotonsa ansiosta. Poikkileikkaus on 25x30 mm. Yläpuolen ura mahdollistaa ohjauksen peukalolla, hallitun otteen ja siten energiaa säästävän vaikutuksen. Ulkopuolella oleva ura vakauttaa lisäksi rannetta.

**Koot:** 22", 24", 25", 26"

**Värit:** 3 vakioväriä ja 6 popup-väriä

**Kiinnitys:** 6-piste: latta- tai ruuvikiinnitys

**Suosittelun käden koko:** keskikokoinen tai iso

### Lignorim Medium - ovaali oteprofiili

**MEDIUM** malli on ovaalimuodoista pienin ja sen poikkileikkaus on 20x24mm. Se tarjoaa suuremman pitopinnan kuin Light-malli.

**Koot:** 22", 24", 25", 26"

**Värit:** 3 vakioväriä ja 6 popup-väriä

**Kiinnitys:** 6-piste: latta- tai ruuvikiinnitys

**Suosittelun käden koko:** keskikokoinen tai pieni

### Lignorim Light - pyöreä oteprofiili

**LIGHT** on kevyt malli, jossa on pyöreä muoto (poikkileikkaus 20 mm), on suunniteltu pienemmille käsille ja henkilöille jotka arvostavat keveyttä ja pientä tartuntapintaa.

**Koot:** 20", 22", 24", 25", 26", 28"

**Värit:** 3 vakioväriä ja 6 popup-väriä

**Kiinnitys:** 6-piste: latta- tai ruuvikiinnitys

**Suosittelun käden koko:** pieni




## Varastovärit



Dark

Natur

## Tilausvärit

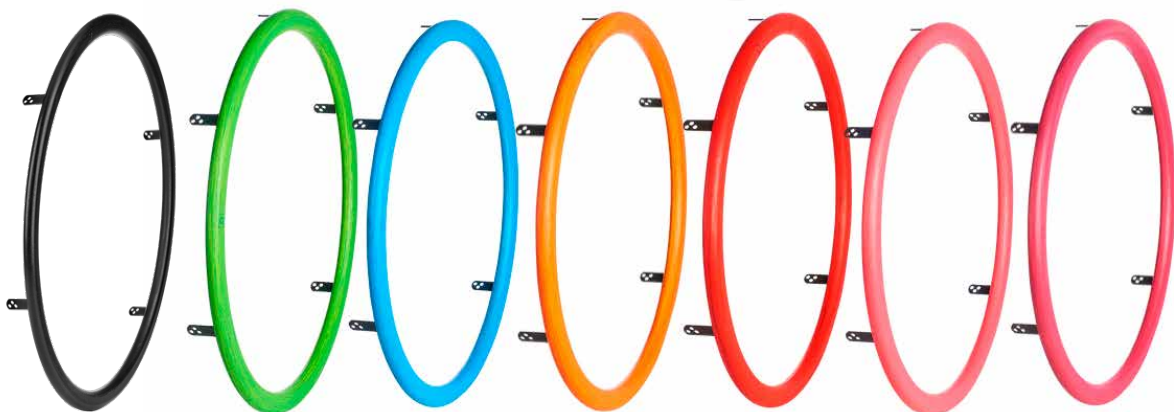

Intense Black

Veggie

Lagoon

Sunset

Poppy

Piglet

Dragonfruit

## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO	MALLI	KOKO	VÄRI	KIINNITYS
820007460	LIGNORIM BIG	24"	NATUR	6-PISTE, LATTA
820007461	LIGNORIM BIG	24"	DARK	6-PISTE, LATTA
820007462	LIGNORIM BIG	24"	NATUR	6-PISTE, RUUVI
820007463	LIGNORIM BIG	24"	DARK	6-PISTE, RUUVI

\* Malli BIG / 24"(S2)

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita. © 2023 Camp Mobility



Valmistaja:  
Lignorim GmbH  
Friedlach 65  
9555 Glanegg  
Austria  
s.hochsteiner@lignorim.com



n. 635 g\*