

## TEKNISET TIEDOT

Valmistajan t.nro: APH100		Linak Control System	
Makuualustan leveys	1200mm	Reisiosan kulmansäätöalue	0-30°
Makuualustan pituus	2050mm	Sääriosan kulmansäätöalue	13-17°
Sängyn kokonaisleveys	1360mm	Renkaiden halkaisija	120mm
Sängyn kokonaispituus	2290mm	Trendelenburg / anti Trendelenburg kulma	0-10°
Sängyn sisäpituus (pääty-pääty)	2150mm	Lukittava käsiohjain	Kyllä
Makuu-alustan vähimmäiskorkeus lattiasta	330mm	Metalliosien takuu-aika	5 v
Makuu-alustan maksimikorkeus lattiasta	730mm	Sähköosien takuu-aika	5 v
Max. käyttäjäpaino	350kg / 55 Stone	Patjan pidikkeet	Kyllä
Safe Working Load (SWL)	385kg / 60 Stone	Automaattinen kokoontaitto	Kyllä
Selkäosan kulmansäätöalue	0-73°	Irrotettavat alumiiniset sivulaidat täyttää standardin IEC 60601-2-52 (201.9.8.3.3.3)	



Jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen vuoksi Apollo Healthcare Technologies Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta. Tämä ei vaikuta tuotteen toimivuuteen. Katso aina käyttöohjeesta käyttöön liittyvät ohjeet.

Lisätietoja Apollo Health Care sales team Tel: +44 (0) 1924 614567



**Myynti Suomessa**  
**Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility**  
 Patamäenkatu 5, 33900 Tampere  
 Tel: 09-350 76310 Fax: 09-350 76311  
 Email: myynti@campmobility.fi www.campmobility.fi




**Apollo Healthcare Technologies Limited**  
 Holme Street, Liversedge, West Yorkshire WF15 6JF  
 Tel: +44 (0) 1924 614567 Fax: +44 (0) 1924 607480  
 Email: sales@apollo-ht.co.uk www.apollo-ht.co.uk



Asennus  
mahdollista  
yhdellä  
henkilöllä

## Apollo Olympus Bariatric kokoontaitettava hoivasänky

**Olympus Bariatric sähkösäätöinen kokoontaitettava hoivasänky on tyylikäs ja kestävä helppokäyttöinen hoiva- ja hoitokoteihin profiloitu sänky. Max 350 kg. Helppo asennus 60 sekunnissa ilman manuaalista työtä.**

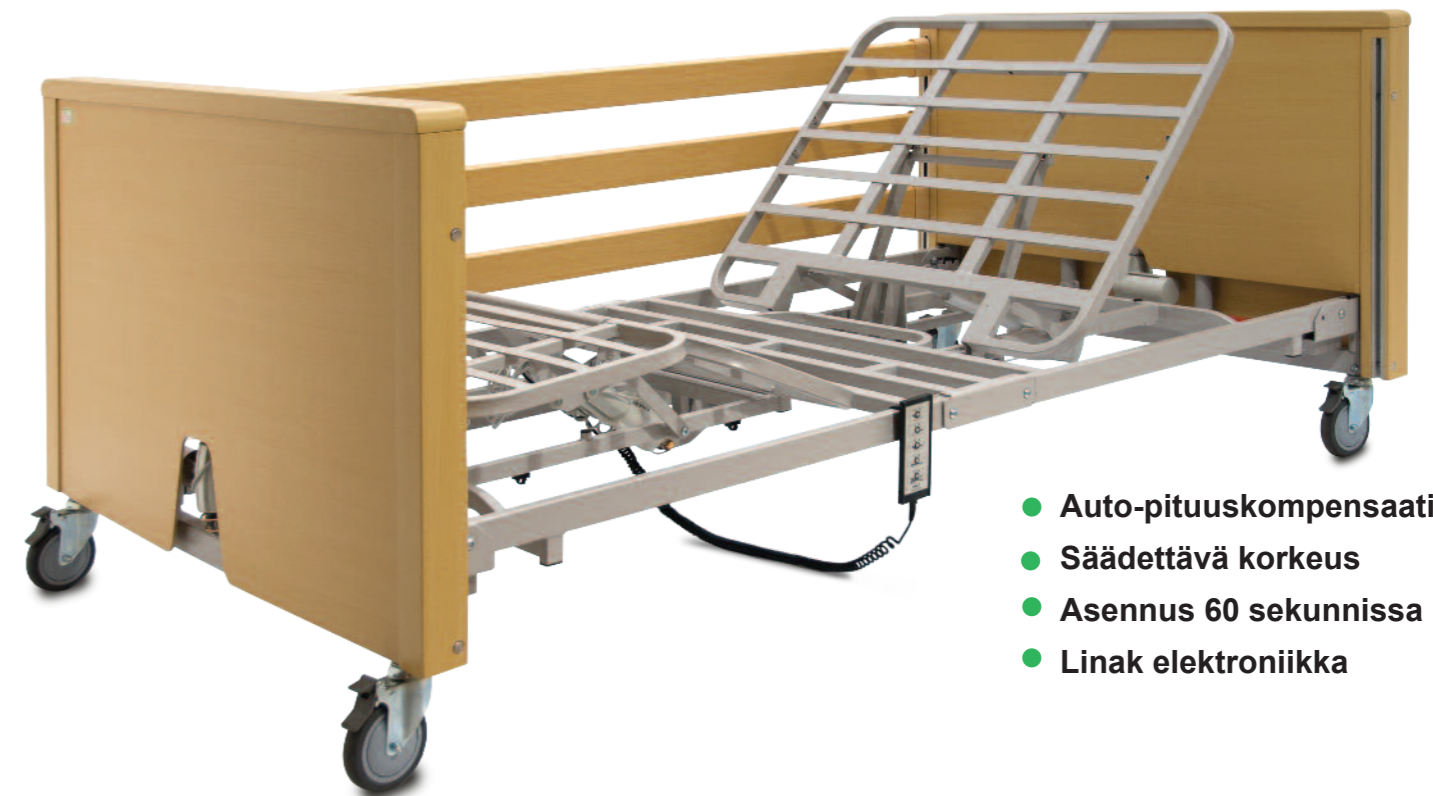

- Auto-pituuskompensaatio
- Säädetty korkeus
- Asennus 60 sekunnissa
- Linak elektroniikka



www.apollo-ht.co.uk

# Apollo Olympus Bariatric Kokoontaitettava hoivasänky

Olympus Bariatric täysin sähkösäätöinen kokoontaitettava bariatrinen hoivasänky, jossa yhdistyvät helppokäyttöisyys ja toiminnallisuus miellyttävään muotoiluun. Se sopii ihanteellisesti hoiva- ja hoitokotikäyttöön.

Tämän sängyn tärkein ominaisuus on, että se taittuu sähköisesti, joten sen voi toimittaa ja asentaa yksi henkilö. Tämä säästää huomattavasti aikaa ja vähentää selkävammojen riskiä asennuksen aikana.

- Automaattinen selkäosan pituuskompensoatio lisää mukavuutta selkätuen aktivoinnin yhteydessä ja vähentää samalla hankausta / kitkavoimaa.
- Helppokäyttöinen käsiohjain optimoi potilaan mukavuuden ja hyvinvoinnin.
- Vakiona 3 puomiset täyspitkät puukuvioidut alumiinisivulaidat

Asennus  
mahdollista  
yhdellä  
henkilöllä




• Kuljetus  
kokoontaitettuna



• Matalin korkeus 33 cm



• Yksittäin  
lukittavat pyörät

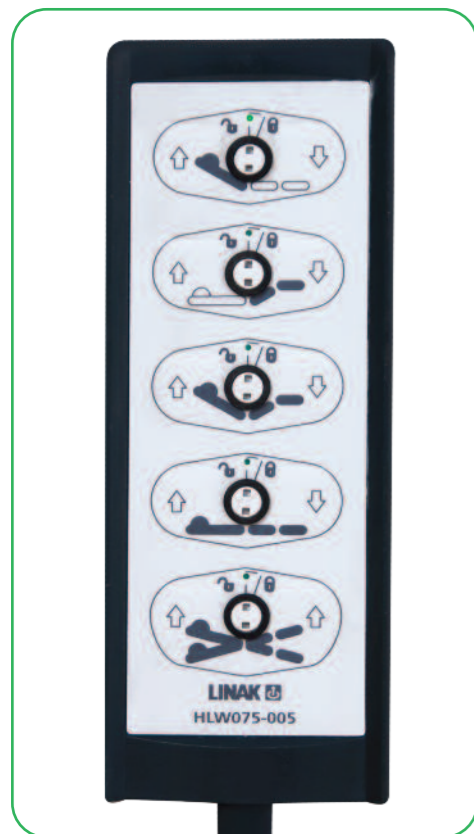


• LINAK monitoiminen  
lukittava käsiohjain



• Asennus yhdellä napin  
painalluksella



• Kokoontaitto yhdellä  
napin painalluksella

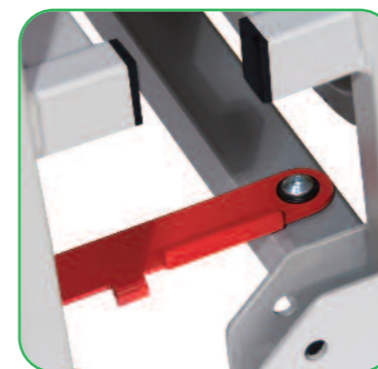

• Lukittava  
kuljetuskiinnike

