

UUSI!



Täyttää  
IEC 60601-2-52  
laatustandardin  
vaatimukset.

## Medley Ergo kotihoitosängyt – rajattomiin käyttötarpeisiin



*Invacare Medley Ergo* kotihoitosängyissä yhdistyy loistavassa balanssissa taloudellisuus, toiminnallisuus ja laatu. Sängyjen makuualustan eri osien optimaaliset mittasuhteet lisäävät käyttäjän mukavuutta erityisesti istuma-asennossa. Optimaalinen pituus myös vähentää kudoksen venytystä ja estää käyttäjää liukumasta alaspäin makuualustan asentoa säädettäessä.

**Medley Ergo Low**:ssa on samat ominaisuudet kuin Ergossa, mutta lisäksi sen extra-matala makuualusta antaa maksimiturvallisuuden käyttäjille, joilla on riski pudota sängystä.



Sekä *Medley Ergo* että *Medley Ergo Low* voidaan muuttaa **Medley Ergo Select** malliksi. Select malli on erityisesti kotihoitoon tarkoitettu kotihoitosänky, jossa kaikki metalliosat on koteloitu tyylikkäästi pyökkipaneelien sisälle.

Kaikki *Medley Ergo* mallit on helppo kuljettaa, koota ja purkaa osiin.



**Yes, you can.**<sup>®</sup>



## Vähentää hankaumia ja kudosenvenytystä

Makuualustan eri osat on suunniteltu optimaaliseksi antropometristen mittausten ja painehaavakartoitusten suositusten mukaan.

- Lisää käyttömukavuutta istuma-asennossa
- Vähentää hankaumia ja kudosenvenytystä
- Minimoitu riski liukua alaspäin asennon vaihtojen aikana
- Optimaalinen myös lyhyemmille potilaille, joilla on heikko kehonhallinta

## Enemmän vähemmässä ajassa

Invacare Medley Ergo tuoteperhe on suunniteltu erityisesti työympäristöihin, joissa sängy siirrellään usein, kuten hoitokoteihin ja hoitolaitoksiin. Lisävarusteena saatavana erityiset kuljetuspalat, joiden avulla sängyn voi helposti ja nopeasti nostaa, siirtää ja uudelleen asentaa uuteen paikkaan. Lisäksi mikä tahansa säätö voidaan tehdä ilman työkaluja tai teknisen huoltohenkilökunnan apua. – Säästää rahaa, aikaa ja vaivaa.

## Eikä korkeuskaan ole enää ongelma!

Medley Ergo tuoteperhe on suunniteltu joustavaksi. Sängyt voidaan säätää erityisen alhaiselle korkeudelle tai tarvittaessa korkeampaan asentoon, minkä ansiosta sekä hoitohenkilökunnalle että käyttäjälle saadaan ergonomiset parhaat mahdolliset työskentely- ja käyttökorkeudet. Tämä on mahdollista ainutlaatuisien sängynpäätysten ansiosta, jotka mahdollistavat makuualustan säädön ylä- ja ala-asentoihin.

Myös kaikki sivulaidat täyttävät uuden IEC 60601-2-52 turvallisuustandardin.

### Lisävarusteita ja ominaisuuksia



#### Puiset sivulaidat

Täyspitkät puiset sivulaidat on helppo kiinnittää ilman työkaluja. Saatavana myös pidennetyt sivulaidat.



#### Metallisivulaidat

Täyspitkät terässivulaidat on helppo kiinnittää ilman työkaluja.



#### Scala 2 sivulaidat

Alumiiniset, korotetut, alaskääntyvät sivulaidat. Saatavana 3 eri korkeutta.



#### Verso II sivulaita

Uusi, moderni, alaskääntyvä korotettu alumiinisivulaita.

## Lisävarusteita ja ominaisuuksia



### Medley Ergo Low

mallin voi säätää erittäin alas, mikä lisää käyttäjän turvallisuutta ja mielenrauhaa nukkumaan mentäessä. Tarvittaessa sänky voidaan nostaa hoitotoimenpiteisiin sopivalle korkeudelle. Matala malli lisää käyttäjän itsenäisyyttä, sillä siitä on helppo nousta itse pois tai mennä sänkyyn. Korkeudensäätöalueet 21–61 cm ja 28–68 cm.



### Medley Ergo Select – Kodinomainen Design

Medley Ergo Select -mallissa on miellyttävä kodinomainen muotoilu. Päätyjen ja käyttölaitteiden puiset katteet voidaan asentaa ja irrottaa myös jälkikäteen Medley Ergo ja Ergo Low -sänkyihin. Jokainen sängyn jalka voidaan säätää yksilöllisesti Rastofix -jalkatukien avulla. Medley Ergo Select on helppo purkaa ja koota sekä varastoida kuljetuspalojen avulla.



### Helppo kuljettaa!

Medley Ergo sängyt kasautuu alustalleen, jonka ansiosta ne on helppo kuljettaa ja varastoida.



### Makuualusta

Saatavana puisella tai alumiinisella makuualustalla.



### Kaksi eri korkeutta sängynpäädylle

Medley Ergo  
33–73 cm tai 40–80 cm.  
Medley Ergo Low  
22–62 cm tai 29–69 cm.



### Puiset sängynpäädyt

Kodinomaiset puupaneeliset sängynpäädyt voidaan asentaa myös jälkikäteen.



### Sivulaidan korotus

Täyssivulaitojen korkeutta voi korottaa 150 mm korotusosien avulla.



### Optimaaliset mittasuhteet

Makuualustan tieteellisesti tutkitut, optimaaliset mittasuhteet antavat käyttäjälle parhaan mahdollisen käyttömukavuuden. Makuualustan liukuma istuma-asentoon nostettaessa vähentää kudosvenytystä ja lisää käyttömukavuutta.

## Lisävarusteita ja ominaisuuksia




**Kohottautumislaitteisto**  
Korkeus- ja syvyyssäädettävä.



**Makuualustan pidennysosat**  
Pidennysosien avulla makuualustan pituutta voidaan pidentää 15 cm.





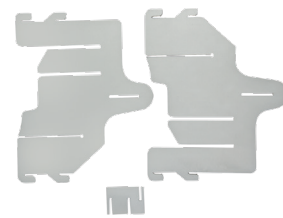








**Erilaisia käsiohjaimia**  
Lukitustoiminnoilla tai ilman.



**Kuljetuspalat**  
Helppoon varastointiin ja kuljettamiseen.

## Tekniset tiedot

						
<b>Medley Ergo</b>	Ulkoleveys: 1020 mm Sisäleveys: 900 mm	Ulkopituus: 2240 mm Sisäpituus: 2080 mm	Kork.säätö: 400 - 800 mm/ 330 - 730 mm	Patja-alustan mitat: 800-230- 300-670 mm	0 - 70° Selkäosan kulma	0 - 24° Reisikulma
<b>Medley Ergo Low</b>	Ulkoleveys: 1020 mm Sisäleveys: 900 mm	Ulkopituus: 2240 mm Sisäpituus: 2080 mm	Kork.säätö: 280 - 680 mm/ 210 - 610 mm	Patja-alustan mitat: 800-230- 300-670 mm	0 - 70° Selkäosan kulma	0 - 24° Reisikulma
						
<b>Medley Ergo</b>	0 - 11° Jalkaosan kulma	11° Kallistus: optio <sup>1</sup>	64 kg	Kuormitus 180 kg Max.käyt.paino 145 kg	Tuotteen painavin osa: 17 kg	
<b>Medley Ergo Low</b>	0 - 11° Jalkaosan kulma	11° Kallistus: optio <sup>1</sup>	64 kg	Kuormitus 180 kg Max.käyt.paino 145 kg	Tuotteen painavin osa: 17 kg	

<sup>1/</sup> Kallistusominaisuutta tulee käyttää vain terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa

**NB/** Tuote ei sovellu alle 12 vuotiaiden käyttöön tai henkilöiden, joiden kehonpaino vastaa 12 vuotiaan tai pienemmän henkilön kokoa.

Valmistaja: Invacare Rea AB  
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi  
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland

## Runkovärit ja puuosat



Harmaa alumiini



Pyökki