

Dynaaminen Käsituki

Modulaarinen ratkaisu kyynärpäälle,
kyynärvarrelle ja kämmenelle pyörätuolin
ja sähköpyörätuolin käyttäjille



 **Bodypoint**[®]
STRENGTHEN YOUR POSITION

PATENTOITU SÄADETTÄVÄ KÄSITUKI

Kliinisesti kehitetty, patentoitu ja säädettävä dynaaminen käsituki on kehitetty erityisesti neurologisille käyttäjille.

Se tarjoaa kolme tukipistettä kyynärpäälle, kyynärvarrelle ja kädelle. Tavoitteena on estää kontraktuuroja sekä olkapään kipua ja sijoiltaanmenoa. Ainutlaatuisen muotoiset pehmusteet tukevat kyynärvarren ja käden toimivaa ja neutraalia asentoa.

Säädettävissä henkilökohtaisiin tarpeisiin

- Kämmentuki ja kyynärvarsipehmuste ovat säädettävissä käyttäjän käsivarren pituuden mukaan.
- Koko käsituki voidaan kääntää sisään- tai ulospäin käden ja ranteen asennon mukauttamiseksi.




3 keskeistä kontaktipistettä

Käsituki voidaan asentaa nopeasti käyttäjän tarpeiden mukaan:

1. Kyynärpääpehmuste
2. Kyynärvarren pehmuste
3. Kämmentuki


DYNAAMINEN LIIKE

Kyynärpääpehmusteen alle sijoitettu kääntömekanismi mahdollistaa 60°:n kierron, mikä stimuloi proprioseptiikkaa ja kasvattaa voimaa ja liikelaajuutta. Asento voidaan lukita myös 5°:n välein ihanteellisen lepoasennon löytämiseksi käyttäjälle.

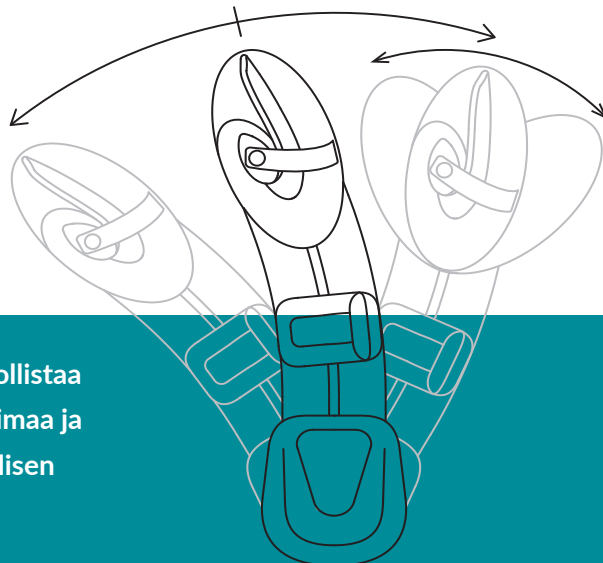


Ainutlaatuinen joustava kämmentuki

- Dynaamisen kämmentuen design sallii sormien liikkeen ja rohkaisee kättä palaamaan neutraaliin asentoon, kun lihasjännitys vapautuu.
- Peukalo lepää mukavasti luonnollisessa lepoasennossa kohotetussa osassa.
- Pehmustettu hihna kulkee rannelihasten nivelten yli ja pitää käyttäjän käden turvallisesti ja mukavasti paikoillaan.
- Säädä ranteen kulmaa asiakkaalle sopivan asennon mukaiseksi.

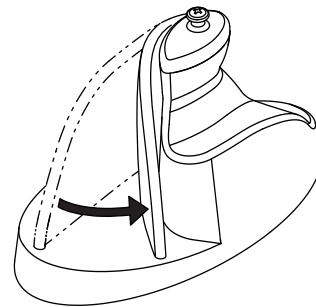

Optimaalinen hartioiden asento

- Modulaarinen käsituki voidaan säätää sopimaan monenlaisille käyttäjille.
- Pehmeä ja kestävä vaahtopehmuste takaa oikean paineen jakautumisen ja estää subluksaatiota.
- Oikea asento vähentää huomattavasti olkapäälihasten rasitusta ja tarjoaa proprioseptiivisen hartia-asennon.

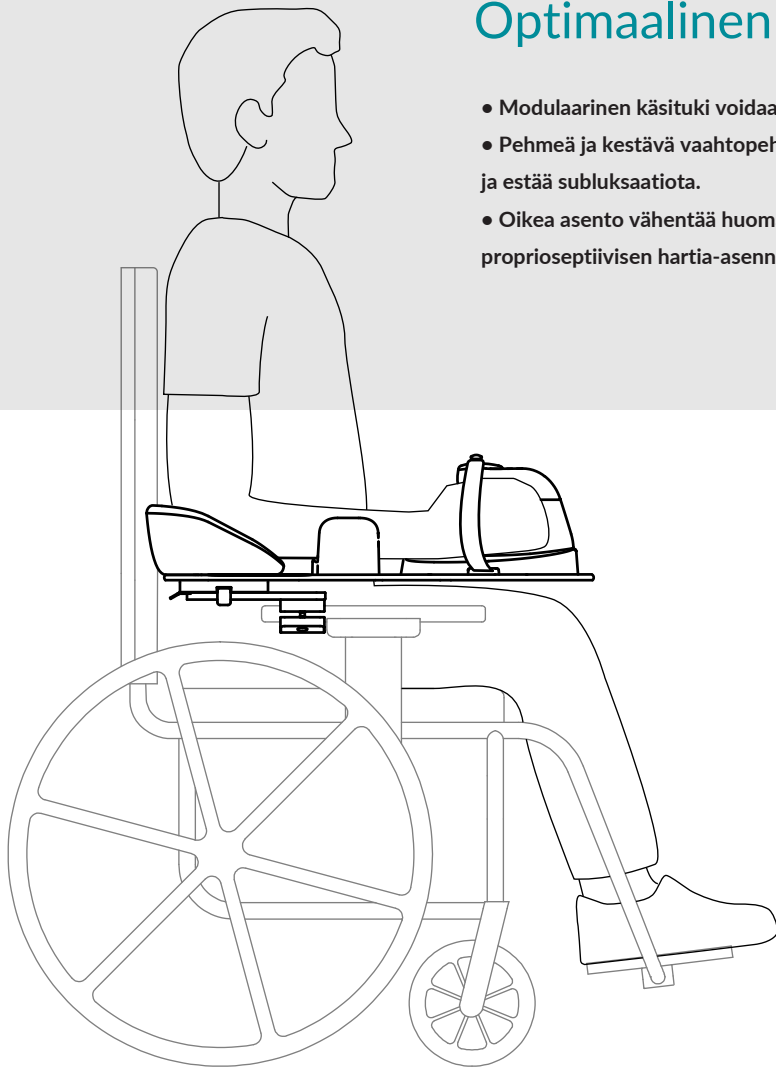

Kyynärvarsipehmuste

- Kyynärvarsipehmuste on sekä syvyyss- että kulmasäädettävä oikean kosketuksen ja asennon varmistamiseksi.
- Kyynärvarren pehmuste voidaan kääntää (voidaan kääntää 180 astetta) niin, että se voi tukea kyynärvartta mediaalisesti tai lateraalisesti.

PIKALUKITUSTOIMINTO

- Ainutlaatuinen Quick-Release Mekanismi
- Helppo irroittaa siirtymisten ajaksi
- Lukittuu lujasti paikalleen
- Vahvuustestattu, kiinteä asennus



3 Vaiheinen tilaus

Step 1: Ilmoita, tuleeko tuki vasempaan vai oikeaan käteen

Step 2: Valitse kämmenkappaleen koko: Small tai Large

Mittaa keskisormen pituus: Small (8.5 cm-10.5 cm) tai Large (10.5 cm-12 cm)

Step 3: Valitse käsituen kiinnikkeen kiinnitystyyppi: putkimainen tai litteä

Käsituki voidaan kiinnittää useimpiin korkeussäädettäviin käsinojiin kiinnityspuristimilla, jotka sopivat 19, 22 tai 25 mm:n kokoisille (3/4", 7/8" ja 1") pyöreisiin putkiin tai erilaisiin litteisiin käsinojiin sopivalla yleiskäyttöisemmällä kiinnikkeellä.



Dynaamisen käsituen suunnittelun lähtökohta oli halu kehittää helppokäyttöinen ja anatomisesti oikea ratkaisu, joka vähentäisi huomattavasti riskiä pitkäaikaisista yläraajojen toimintahäiriöistä ja edistäisi toiminnallista aktiivisuutta.

Käsitukea voidaan käyttää heti vamman jälkeen optimaalisen kliinisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi kääntömekanismi mahdollistaa aktiivisen liikealueen (ROM) ja pikalukitusmekanismi mahdollistaa helpon irrottamisen pyörätuolin käsinojasta, joka takaa turvallisuuden ja mahdollistaa helpot siirtymiset.

Käsituki voidaan kiinnittää useimpiin korkeussäädettäviin käsinojiin kiinnikkeiden avulla, jotka sopivat 19 mm, 22 mm ja 25 mm putkiin tai yleisemmällä litteällä kiinnikkeellä, joka sopii erilaisiin litteisiin käsinojiin.



206.405.4555

800.547.5716

sales@bodypoint.com

www.bodypoint.com

 **Bodypoint®**

STRENGTHEN YOUR POSITION