

INGLESE - cod.22428/A 05.24



ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

CLIP



CLIP

Liikkuvale perheelle.

CLIP by Ormesa on käytännöllinen ja nopea istuinjärjestelmä vammaisille lapsille ja aikuisille.

Sitä on helppo käsitellä, taittaa ja työntää.

Sen pyörät sopivat kaikkiin maastoihin ja taittotoiminnot ovat nopeita ja käyttäjäystävällisiä.

Saatavilla olevien lisävarusteiden laajan valikoiman ansiosta se mukautuu erilaisiin tarpeisiin.

Sen keveys ja helppo kokoontaitto tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun perheille, jotka ovat usein liikkeellä tai jotka asuvat kaupungeissa, joissa on vaativat kulkuyhteydet jalkakäytävällä ja ruuhkaisilla alueilla.



PRODUCT
MARKED 

CLIP on LÄÄKETIETEELLINEN LAITE, joka TÄYTTÄÄ ASETUKSEN (EU) 2017/745 TURVALLISUUSVAATIMUKSET



Clip 1, 2, 3 on läpäissyt Törmäystestin
ISO 7176/19 -standardin mukaisesti

Kevyt ja kestävä

Selkäosassa ja istuimessa sisään integroidut irrotettavat alumiiniputket



Tuplaristikkorakenne

Sijaitsee selkänojan takana ja istuimen alla takaa tukea ja mukavuutta.

Sisään integroidut runkoputket

Valmistettu alumiinista, löytyy sekä selkänojasta että istuimesta. Ne ovat muotoiltu vastaamaan erityisiä asentotarpeita. Nämä tangot takaavat oikean jäykkyyden selkänojalle ja istuimelle säilyttäen silti hengittävyden.

Helposti irrotettava verhoilun pesua varten.



Selkäosa

Säädettävä kallistus 3 asentoon takana sijaitsevien vetoketjujen avulla.

Selkänojassa on tasku pikkutavaroille.

Istuin

Pieni kaltevuus lisää istuimukavuutta.



ORMESA



NEW

Säädettävät työntökahvat

TYÖKALUVAPAAkorkeudensäätö



Irrotettavat jalkatuet

Ulosvedettävä, korkeussäädettävä koot 1, 2, 3.
Korkeussäädettävä ja taitettava koko 4.



NEW

Renkaat

puhkaisunkestävä, sopii kaikentyyppisiin maastoihin.

Clip 1, 2, 3: kääntyvät etupyörät 15 cm;

20 cm takapyörät, itsenäisillä jarruilla

Clip 4: 17,5 cm:n kääntyvät etupyörät;

25 cm takapyörät, **itsenäisillä rumpujarruilla.**

+ Polkaisuputki.

High performance

Huippuluokan verhoilumateriaalit


CLIP:ssä on erittäin hengittävä, mukava, kestävä, helposti puhdistettava ja nopeasti kuivuva irrotettava verhoilu.

Selkänojan ja istuimen keskiosassa päällyste on valmistettu erittäin innovatiivisesta ja hengittävästä materiaalista sekä sisältä että ulkoa.

Sisäkangas on kolmiulotteinen, kevyt ja varmistaa:

- korkea ilmankierto
- optimaalinen painon jakautuminen
- erinomainen mukavuus.

Päällyskangas on myös erittäin kulutusta kestävä ja palonkestävä standardien EN 1021-1:2014 ja EN 1021-2:2014 mukaisesti.

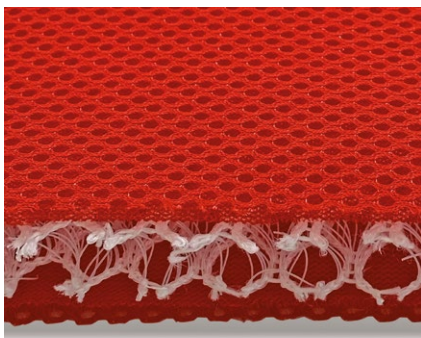

Helposti pestävä
nopealla
kuivumisajalla!



CLIP 1 • 2 • 3



CLIP 4



Lisävarusteet



835 Niskatuki parietaalituilla.



816 Vartalon sivutuet



853 Liiviyö



906 5-pistevyö



903 5-pisteliiviyö



894 45° Lantiovyö



834N Pehmustettu irrotettava haarakila

Lisävarusteet



858 Alatason kassitaso



827 Jalkapöytäremmit



812 Etupyörän suuntalukitus



819 Kuomu



825 Sadesuoja
819 Kuomun kanssa



818 Lämpöpussi

891 Taksikoukut

rattaiden kasvot menosuuntaan kuljettamiseen
moottoriajoneuvossa (henkilöautot, linja-autot...
Vain malleille CLIP 1, 2 ja 3.

Katso tuotteen mukana toimitettu käyttö- ja
huolto-ohje






CLIP 1.2.3



CLIP	A Selkäosan leveys	B Kokonais- leveys	C Kokonais- korkeus	D Selkäosan kulman- säätö	E Istuin- syvyys	F Selkäosan korkeus	G Istuin- kulma	H maasta istuinlusta- aan korkeus	I Säärimitta korkeus	L Kahvoista pyöriin etäisyys	M Kokonais- pituus	N Kokoon- tattuna pituus	O Kokoon- tattuna korkeus	P Kokoon- tattuna leveys	Q Käyttäjän pituus	Kokonais Paino	Max kuormitus
1	40 cm 15,7 in	51 cm 20 in	101-108 cm 39,7-42,5 in	0° - 12°	25 cm 9,8 in	55 cm 21,6 in	18°	46 cm 18,1 in	12 - 20 cm 4,7 - 7,8 in	78 cm 30,7 in	84 cm 33 in	114 cm 44,8 in	30 cm 11,8 in	34 cm 13,3 in	110 - 125 cm 43,3 - 49,2 in	10,3 kg 22,7 lb	30 kg 66,1 lb
2	40 cm 15,7 in	51 cm 20 in	101-108 cm 39,7-42,5 in	0° - 12°	30 cm 11,8 in	59 cm 23,2 in	18°	48 cm 18,8 in	21 - 31 cm 8,2 - 12,2 in	78 cm 30,7 in	92 cm 36,2 in	114 cm 44,8 in	30 cm 11,8 in	34 cm 13,3 in	120 - 140 cm 47,2 - 55,1 in	10,5 kg 23,1 lb	35 kg 77,1 lb
3	40 cm 15,7 in	51 cm 20 in	106-113 cm 41,7-44,4 in	0° - 12°	35 cm 13,7 in	63 cm 24,8 in	18°	49 cm 19,2 in	25 - 35 cm 9,8 - 13,7 in	84 cm 33 in	98 cm 38,5 in	118 cm 46,4 in	34 cm 13,3 in	36 cm 14 in	135 - 155 cm 53,1 - 61 in	10,7 kg 23,5 lb	40 kg 88,1 lb


CLIP⁴

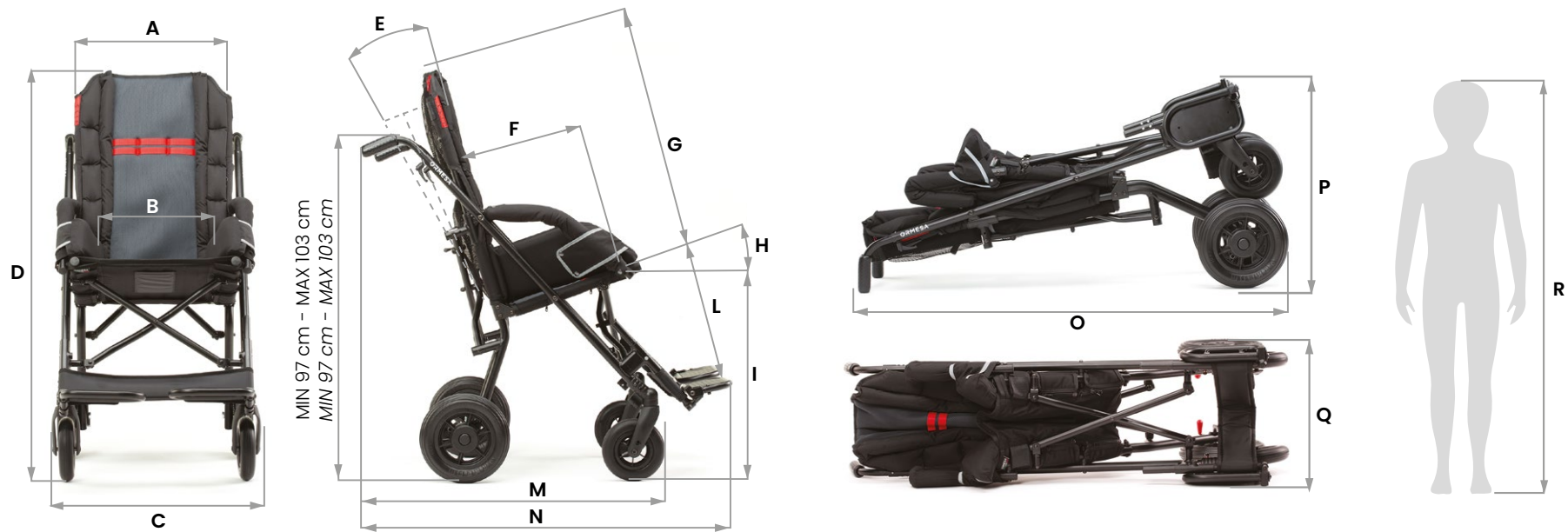

MIN 97 cm - MAX 103 cm
MIN 97 cm - MAX 103 cm

	A Selkäosan levyys	B Istuin- levyys	C Kokonais- leveys	D Kokonais- korkeus	E Selkäosan kulman- säätö	F Istuin- syvyys	G Selkäosan korkeus	H Istuin- kulma	I maasta stuinalustaan	L Säätökorkeus	M Kahvoista pyöriin	N Kokonais- pituus	O Kokoon- taittuna	P Kokoon- taittuna	Q Kokoon- taittuna	R Käyttäjän pituus	Kokonais Paino	Max kuormitus
4	45 cm 17,7 in	33* cm 12,9* in	57 cm 22,4 in	113 cm 44,4 in	0° - 10°	38 cm 14,9 in	71 cm 27,9 in	20°	59 cm 23,2 in	37 - 47 cm 14,5 - 18,5 in	89 cm 35 in	108 cm 42,5 in	117 cm 46 in	60 cm 23,6 in	37 cm 14,5 in	150 - 170 cm 59 - 66,9 in	13,9 kg 30,6 lb	76 kg 167,5 lb

*istuinlevyys on 45 cm (17,7 in) kun sivutuet irroitetaan

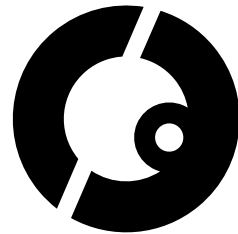

CE complies with MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

