

INGLESE - cod.220632 -16.07.24



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

GRILLO
POSTURAL SYSTEM



Rattaat kaikkiin tilanteisiin



Turvallinen, modulaarinen ja monipuolinen

Grillo Postural System on modulaarinen asentojärjestelmä lapsille ja nuorille, jossa on integroitu tilt-in-space -kallistus.

Saatavana 3 kokoa: Mini, Small ja Medium.

Istuinosa on irrotettava ja se voidaan sijoittaa:

- kompakti, innovatiivisesti suunniteltu ulko-/ratasalusta, joka on kokoontaitettava ja kevyesti ohjailtava. tai
- sisäalusta korkeudensäätöjärjestelmällä, kansainvälisesti patentoitu "GRILLO-tuoteperheen" alusta, joka tarjoaa kompaktin ja tilaa säästävän alustan ja laajan korkeudensäätöalueen.

Grillon säädöt tekevät siitä erittäin pitkäikäisen istuinjärjestelmän, joka seuraa lapsen kasvua.

Laajan komponenttivalikoiman ansiosta se on helposti mukautettavissa useisiin tarpeisiin.



GRILLO Postural System ratasalustalla on läpäissyt ISO 7176/19:n ja ANSI RESNA WC/19:n mukaisen törmäystestin.

PRODUCT
MARKED **CE**

GRILLO POSTURAL SYSTEM on ASETUKSEN (EU) 2017/745 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TÄYTTÄVÄ LÄÄKETIETEELLINEN LAITE

Istuinjärjestelmä, joka voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti kahteen alustaan



Nopea ja turvallinen kiinnitys-/irrotusjärjestelmä istuimen alle sijoitetun vivun avulla



Turvallinen

Visuaaliset merkit antaa välitöntä palautetta, muuttuen punaisesta vihreäksi, kun laite on tiukasti kiinni, mikä varmistaa optimaalisen turvallisuuden.

Integroitu turvajärjestelmä estää tahattoman irtoamisen.



Helppo ja intuitiivinen


Yksivaiheinen istuinosan sijoittaminen alustan päälle. Muita vaiheita ei tarvita!

Nopea!

Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa yksinkertaisella operaatiolla



watch the video!

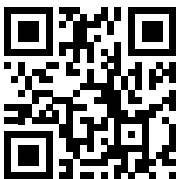

Nopeasti käännettävissä oleva istuinosa



“kasvotusten” lapsen kanssa

Ulko-/ratasalustalla varustettua istuinjärjestelmää (kaikki koot) voidaan käyttää kahteen suuntaan: menosuuntaan tai vanhempaan päin.

Näkymä menosuuntaan suosii visuaalista ympäristön tutkimista, kun taas näköyhteys vanhempaan päin lapsen ja aikuisen välistä kontaktia.

Ulkoratasalusta



Kätevä, sujuva ja kompakti

Helposti ohjattavat ja tilaa säästävät neljä pyörää:

kevyet, tasaisesti pyörivät kiinteät pyörät kaikilla pinoilla, etusuuntalukolla, takaiskunvaimentimilla ja itsenäisillä rumpujarruilla.



Katso video!



Sisäalusta



Kompakti, tukeva ja kätevä. Korkeussäädettävä.

Sisäalustassa on korkeussäädettävä runko.

Patentoitu kaasujousella toimiva korkeudensäätöjärjestelmä mahdollistaa istuinkorkeuden muuttamisen lapsen istuessa nopeasti ja helposti. Tämä järjestelmä on ihanteellinen pääsyyn eri tuki- ja työpinoille äärimmäisen helposti ja mukavasti tai tuo lapsen lähemmäs lattiaa.

Integroitu turvajärjestelmä estää tahattoman käytön. Se mukautuu ympäristöönsä, jolloin lapsi voi osallistua päivittäiseen toimintaan ja olla vuorovaikutuksessa perheen ja ikätovereiden kanssa.



Neljän kääntyvän kumipinnoitetun pyörän ansiosta alustaa voi liikutella mukavasti myös lapsen istuessa. Pinnat on suunniteltu estämään lian kerääntymisen ja kaikki pyörät on varustettu seisontajarruilla.





Posturaalinen istuinjärjestelmä



Suojaava ja tukeva selkäosa

mukautuu vartalon muotoihin samalla, kun se antaa riittävän tuen. Alimmisen kantavan verhoilun ja alumiiniosien ansiosta se takaa erinomaisen hengittävyuden ja istumamukavuuden.

Sisäänrakennettu päätuki selkänojassa takaa, että lapsella on aina tuki selkä- ja/tai istuinosa kallistettaessa.

Saatavana erilaisia niska-/pätukimalleja erilaisiin tarpeisiin.



Korkeussäädettävä ja kallistettava

Kaasujousella kallistettava selkäosa, jossa on mukava, tarkka ja portaattomasti säädettävä kulman ja korkeudensäätö.



Istuin

Tilt-in-space -kallistuvaa istuinta ohjaa kaasujousi ja sen syvyys on säädettävissä ilman kiinteitä asentoja.



Lantiotuet (käsituet)

Istuimen leveys on säädettävissä lantiotukien avulla, jotka muodonsa ansiosta toimivat myös käsinojina. Tukien rotaatio, korkeus, syvyys ja kallistus ovat itsenäisesti säädettävissä, jotta ne seuraavat lapsen kasvua ja muotoa ja varmistavat riittävän tuen.





Jalkatuet yhtenäisellä jalkalaudalla

Säädettävä korkeus ja kulma painopisteensäädöllä, tekee säädöstä mukavan.

Säädettävä syvyys istuimen kanssa.



Jalkalauta kantapään rajoittimilla on säädettävissä plantaarista/dorsaalista taivutusta varten.



Jalkatuet erillisillä jalkalevyillä

korkeus, kulma ja abduktio säädettävissä itsenäisesti.

Lisäkomponentti 957

(15° abduktio sisäalustalla, 5° abduktio ulkoalustalla).

Tukirakenne

Verkko ja irrotettava tukirakenne yhdistettynä teknologiseen verhoiluun tarjoaa erinomaisen vartalon ja lantion vakauden, takaa erittäin korkean hengittävyuden ihon mukavuuden ja terveyden hyväksi.


Rakenne vähentää hikoilua ja bakteerien muodostumista. Kankaan koostumus mahdollistaa helpon desinfioinnin ja pesun nopealla kuivumisajalla.

Se säilyttää muotonsa suurillakin kuormituksilla ja on paloturvallisuusluokan 1 palotekninen käyttäytyminen: (syttymättömät palavat materiaalit) 26. kesäkuuta 1984 muutetun asetuksen mukainen.




Huippuluokan materiaali

Maksimaalinen hengittävyys ja mukavuus

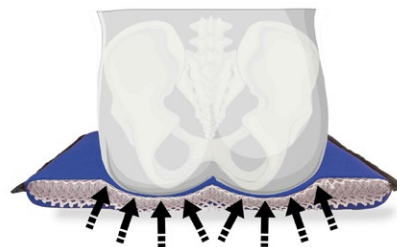

- Optimaalinen "itsekantteleva efekti": erittäin innovatiivinen pehmusterakenne mahdollistaa optimaalisen painon jakautumisen ja tarjoaa erinomaisen mukavuuden. Paine jakautuu optimaalisesti ja pistepaineet laskee merkittävästi. Puristusjännityksen kestävyys (puristusjännitysarvo) (DIN EN ISO 3386) on korkeampi kuin perinteisessä vaahtokumissa.

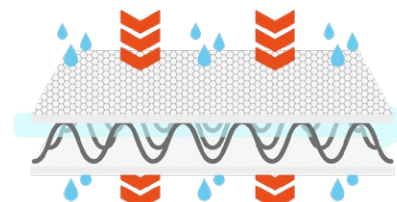


- Kevyt ja hengittävä: tarjoaa erittäin hyvän ilmankierron, vähentää hikoilua ja edistää lämmönsäätelyä.

- Hygieeninen: helppo pestä ja nopeat kuivumisajat.

- Kulutusta kestävä: Erittäin luja pinnoiterakenne säilyttää suorituskyvyn myös suurilla kuormituksilla (ISO 12947 -testi).
- Paloturvallinen: Standardien EN 1021-1:2014 ja EN 1021-2:2014 mukaisesti.
- Öko-Tex-sertifikaatti: kaikille kankaille, jotka ovat suorassa kosketuksessa ihon kanssa, on laadun ja terveysturvallisuuden ta.



**Helposti pestävä
nopealla kuivumisajalla!**

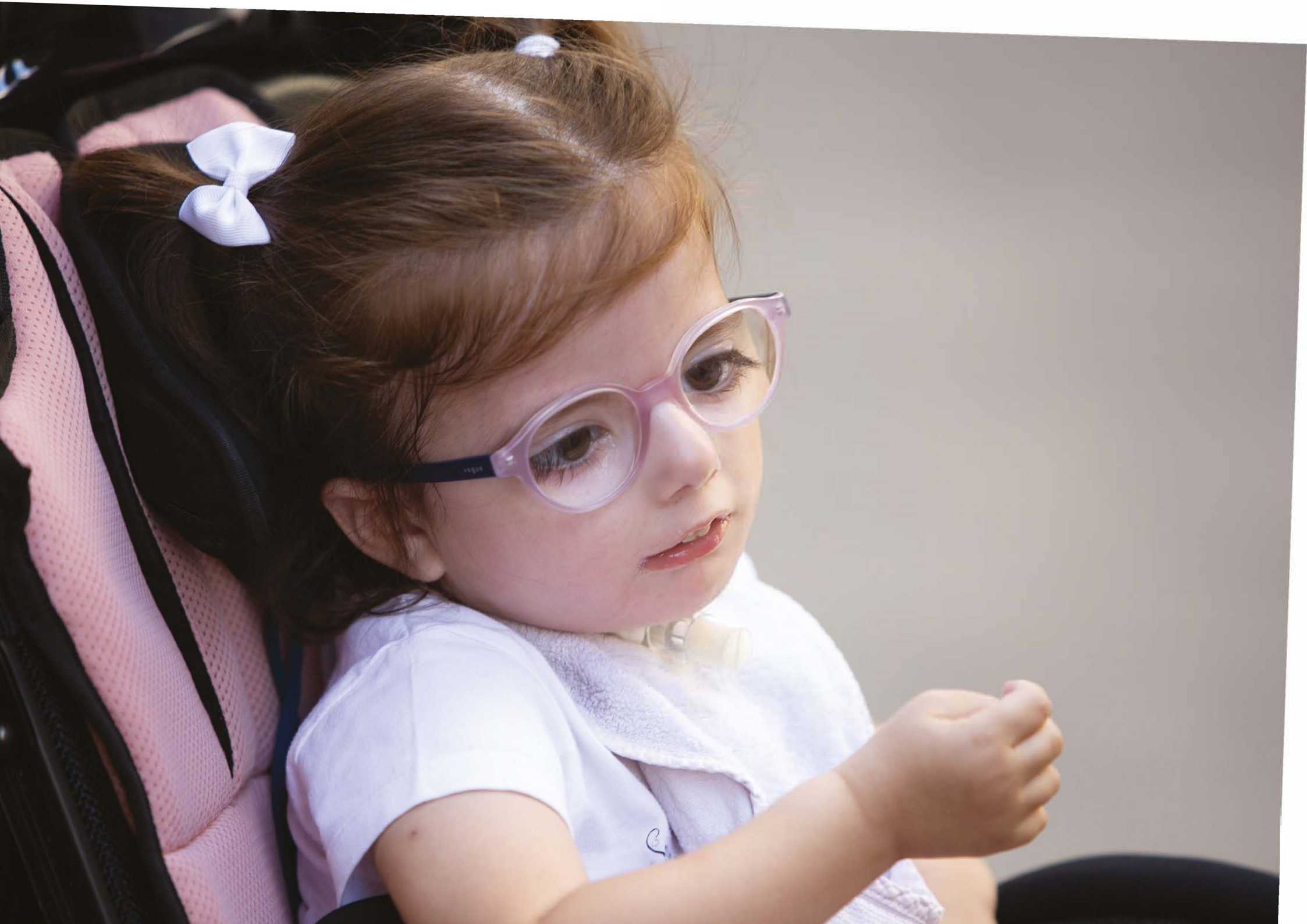



Tilt-in-space selkä- ja jalkaosan kallistus

Tilt-in-space istuimen kallistus ja selkäosan kallistus avulla voit luoda ihanteellisen tuki- ja lepotilanteen. Kaksi itsenäistä kaasujoustusta takaavat portaattomat ja sujuvat säätöliikkeet.

Suurimmassa kallistusasteessa istuin ulottuu selinmakuuasentoon.



Aktiivinen tilt-in-space kallistus

hyödyllinen lapsen asettamiseksi aktiiviseen asentoon, suorittaa selkälihasten suoristusta ja aktivointia stimuloivaa toimintaa.

Sisäänrakennettu turvamekanismi. Vain sisälusta.



Kehon nivelten mukaiset säädöt

Istuinjärjestelmän säätöpisteet ovat käyttäjän nivelten vieressä (coxofemoraalinen nivel, polvi ja tibiotalpaalilivelet).

Tämä rakenteellinen ominaisuus antaa huomattavan hyödyn lapselle, koska asento ei muutu säätöjen aikana.





Säädettävä, tilaa säästävä työntötanko

Korkeuden ja kulmansäätö vihreistä vivuista.

Mahdollistaa rattaiden mukavan käsittelyn myös istuimen ja/tai selkänojan ollessa kallistettuna.



Iskunvaimentimet

takapyörissä, missä myös suurin kuormitus.

Itsenäiset rumpujarrut

tehokkaat ja kestävät. Sisältää paikoitusjarrut.



Etupyörien suuntalukitus

Lisävarusteet



863 Päätuki

korkeus, leveys, kulma ja syvyys säädettävissä, säädettävillä sivutuilla.

Saatavana 2 kokoa



942 Ergonominen ja muokattava päätuki

korkeus, kulma ja etu-takasuuntaan säädettävissä, säädettävillä sivutuilla.

Saatavana 3 kokoa



835 Pehmustettu muotoiltu päätuki

korkeussäädettävä

Saatavana 2 kokoa



852 Päätuki parietaalituilla

Leveysäädettävä,

Saatavana 2 kokoa



838 Vartalon sivutuet

korkeus ja leveys säädettävissä, käännettävissä toisinpäin.

Saatavana 3 kokoa



967 Olkapään sivutuet

Vakiovarusteena ratasalustassa, optiona sisäalustassa.



868 Kiinnitettävät joustavat vartalotuet

korkeus ja leveys säädettävissä, käännettävissä toisinpäin.

Saatavana 2 kokoa

Lisävarusteet



961 Kynärpäätuet
korkeussäädettävät
Vain sisälustaan.



853 Liivivyö
Saatavana 2 kokoa



853 4-pistevyö, slim



853H Vartalotukivyö, vakauttaa
vartaloa ja sallii vapaan liikkeen.
Saatavana koko: mini.



947 Lantiovyö,
kulmasäädettävä vakiona
Saatavana 3 kokoa



920 4-pistelantiovyö
Saatavana 2 kokoa



**834N Pehmustettu
kapea haarakiiila**
Saatavana 2 kokoa




834R Säädettävä haarakiiila
Saatavana 2 kokoa

Lisävarusteet



839 Pehmustettu etukaari
korkeus- ja kulmasäädettävä
Vain ratasalustaan.

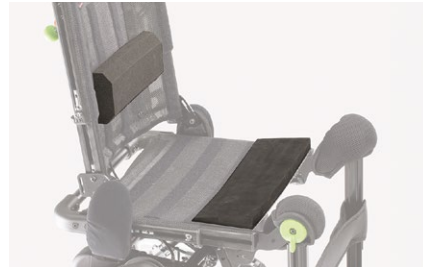

969 Asentopehmuste -setti
Ristiselän tuki ja istuimen kiila eteen, jotka
voidaan sijoittaa kantavan verhoilun päälle.



**824B Leveä, kestävä ja hygieeninen
pöytälevy, sopii elintarvikkeiden
kosketukseen. Monisäädettävä.**
Vain sisäalustaan.. Suuri pöytälevy, korkeus,
syvyys ja kallistus säädettävissä.



824 Pöytälevy, läpinäkyvä
korkeus-, syvyys- ja kulmasäädettävä



**957 Jalkatuet erillisillä
jalkalevyillä**
itsenäisesti säädettävä korkeus, kulma ja
abduktio



960 Kantaremmit
Vain jalkatukien 957 kanssa



**962 Jalkaremmit ja
kantaremmit**
Vain jalkatukien 957 kanssa



**827 Pohjetuki yhtenäiseen
jalkalautaan**

Lisävarusteet



858 Ostoskori alas
Vain ratasalustaan.



935 Happipulloteline
Vain ratasalustaan.



905 Avustajan jarru
Vain ratasalustaan.



825 Sadesuoja
Vain ratasalustaan. Kuomun 819 kanssa



922 Pulloteline
Vain ratasalustaan.



819 Kuomu
Päällä ikkuna



818 Pehmustettu lämpöpussi



GRILLO Postural System with outdoor base has passed the CRASH TEST according to ISO 7176/19 and ANSI RESNA WC/19.

891 Taksikoukut

4 taksikoukun setti rattaiden kasvot menosuuntaan kuljetukseen moottoriajoneuvossa (autot, linja-autot...) Vain ULKOALUSTAAN

Katso tuotteen mukana toimitettu käyttö- ja huolto-ohje.

Grillo Postural System


Ulko-/ratasalusta: mittatiedot (cm/In)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Rungon paino	Istuimen paino	Max. kuormitus
mini	34 (13,4)	16-26 (6,2-10,2)	57 (22,4)	42-52 (16,5-20,4)	51 (20)	72 (28,3)	45°	16-26 (6,2-10,2)	11,5-14 (4,5-5,5)	30°	15-25 (5,9-9,8)	31 (12,2)	65 (25,5)	69 (27,1)	49 (19,2)	57 (22,4)	80 (31,4)	75-105 (29,5-41,3)	10,8 kg (23,8 lb)	9,7 kg (21,3 lb)	25 kg (55 lb)
Small	38 (15)	20-30 (7,8-11,8)	57 (22,4)	48-62 (18,8-24,4)	52 (20,4)	72 (28,3)	45°	20-30 (7,8-11,8)	13-16,5 (5,1-6,4)	30°	21-31 (8,2-12,2)	33 (12,9)	74 (29,1)	69 (27,1)	49 (19,2)	57 (22,4)	80 (31,4)	90-120 (35,4-47,2)	10,8 kg (23,8 lb)	11,3 kg (24,9 lb)	35 kg (77 lb)
Medium	44 (17,3)	25-35 (9,8-13,7)	63 (24,8)	60-75 (23,6-29,5)	55 (21,6)	81 (31,8)	45°	28-40 (11-15,7)	16-20 (6,2-7,8)	25°	26-38 (10,2-14,9)	34 (13,3)	88 (34,6)	70 (27,5)	58 (22,8)	66 (25,9)	88 (34,6)	115-140 (45,2-55,1)	11,8 kg (26 lb)	13,2 kg (29,1 lb)	45 kg (99 lb)

Grillo Postural System


Sisälusta: mittatiedot (cm/In)

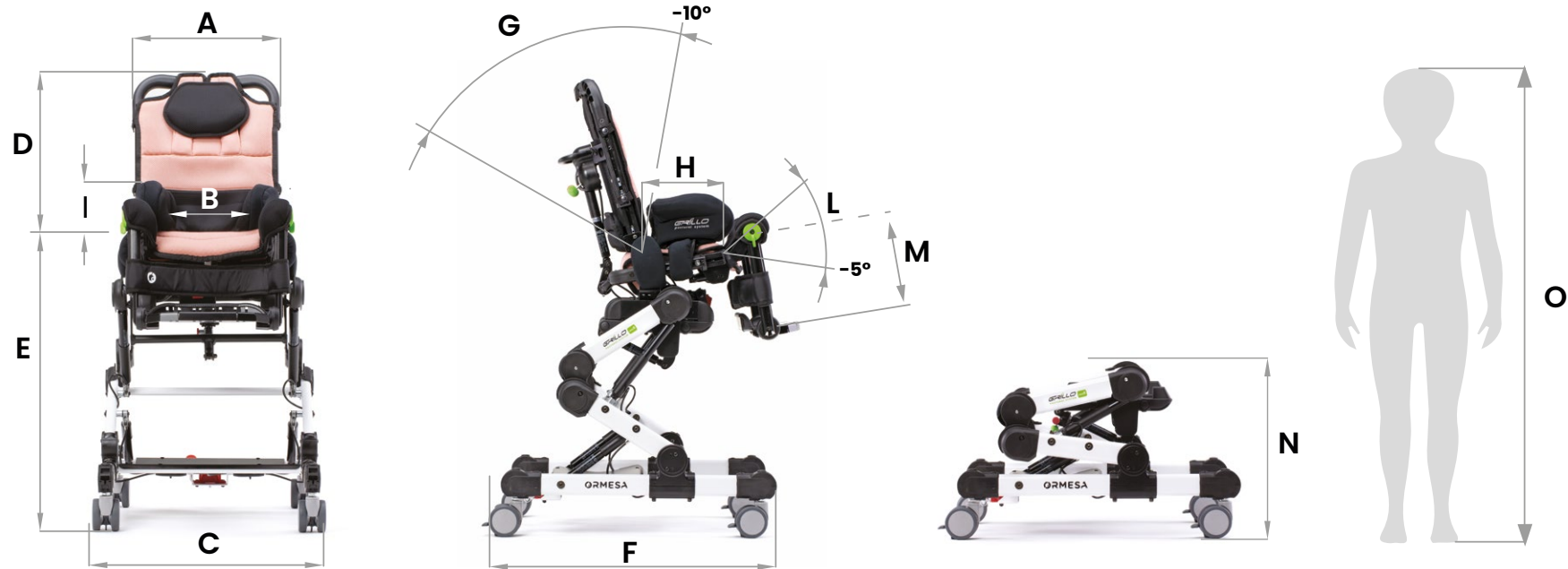

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Rungon paino	Istuimen paino	Max. kuormitus
mini	34 (13,4)	16-26 (6,2-10,2)	53 (20,8)	42-52 (16,5-20,4)	45-65 (17,7-25,5)	65 (25,5)	45°	16-26 (6,2-10,2)	11,5-14 (4,5-5,5)	40°	15-25 (5,9-9,8)	40 (15,7)	75-105 (29,5-41,3)	14,3 kg (31,5 lb)	9,7 kg (21,3 lb)	25 kg (55 lb)
Small	38 (15)	20-30 (7,8-11,8)	53 (20,8)	48-62 (18,8-24,4)	45-65 (17,7-25,5)	65 (25,5)	45°	20-30 (7,8-11,8)	13-16,5 (5,1-6,4)	40°	21-31 (8,2-12,2)	40 (15,7)	90-120 (35,4-47,2)	14,3 kg (31,5 lb)	11,3 kg (24,9 lb)	35 kg (77 lb)
Medium	44 (17,3)	25-35 (9,8-13,7)	58 (22,8)	60-75 (23,6-29,5)	45-65 (17,7-25,5)	74 (29,1)	45°	28-40 (11-15,7)	16-20 (6,2-7,8)	35°	26-38 (10,2-14,9)	41 (16,1)	115-140 (45,2-55,1)	14,9 kg (31,5 lb)	13,2 kg (29,1 lb)	45 kg (99 lb)

Viola ja hänen tarinansa
odottavat sinua Ormesan
virallisilla verkkosivuilla
yhdessä muiden fantastisen
globaalin yhteisömmen
päähenkilöiden kanssa.



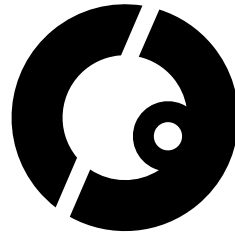

Erityinen kiitos perheille, jotka osallistuivat innokkaasti projektiimme. Asiakkaidemme ja heidän tarinoidensa ansiosta löydämme energiaa ja virikkeitä kehittyä päivä päivältä.

CE complies with MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

