

Adam

työtuoli



Huipputason mukavuutta ja käytännöllisyyttä

Adam-työtuoli on suunniteltu tarjoamaan optimaalista ergonomiaa ja käyttömukavuutta niin työpaikalle kuin kotiinkin.

Adam on korkealaatuinen, sähköisesti korkeussäädettävä työtuoli, joka mukautuu täydellisesti käyttäjän tarpeisiin, mahdollistaen terveellisen ja tuottavan työskentelyasennon.

Adam-työtuoli on varustettu kattavasti jo vakiona, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan vaativaan työskentelyyn. Anatomisesti muotoiltu selkänoja ja istuin tukevat kehoa luonnollisesti, kun taas antibakteerinen verhoilu takaa hygieenisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Kevyesti rullaavat pyörät mahdollistavat vaivattoman liikkumisen, ja täysin taitettavat käsinojat sekä jalkatuki tuovat lisää joustavuutta työskentelyyn.

Ominaisuudet

- Sähköinen korkeussäätö
- Anatomisesti muotoiltu istuin ja selkänoja
- Taitettavat käsinojat ja jalkatuki
- Kevyesti rullaavat pyörät, ei-jälkiä jättävällä lämpökumipinnoitteella
- Antibakteerinen verhoilu

Erinomainen yhdistelmä modernia ergonomiaa ja korkealaatuisia materiaaleja




Keskeisimmät ominaisuudet

1

Sähköinen korkeudensäätö

Korkeutta säädetään vaivattomasti käsinojaan sijoitetusta säätimestä. Erillinen käsiohjauslaite saatavilla lisävarusteena.

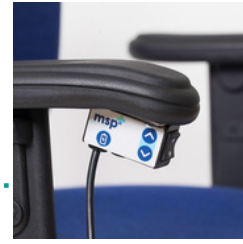

2

Optimaalinen tuki ja mukavuus

Istuin ja selkänoja on muotoiltu anatomisesti tukemaan hyvää asentoa. Selkänojan korkeus ja kulma ovat säädettävissä. Antibakteerinen verhoilu pitää tuolin hygieenisenä.



3

Seisontajarru vakiona

Adam-työtuolissa on vakiona seisontajarru, joka lisää turvallisuutta ja vakautta työskentelyn aikana. Se estää tuolin tahattoman liikkumisen ja varmistaa, että käyttäjä voi keskittyä työhönsä ilman huolta tuolin liukumisesta.

4

Säädettävät ja käännettävät käsituet

Käsintukien korkeus ja leveys ovat säädettävissä ja ne voi tarpeen mukaan kääntää kokonaan pois helpottamaan siirtymistä sivuttaissuunnassa.

Korkeuden säätö

Adam-työtuolin alin korkeus voidaan mekaanisesti määrittää käyttäjän pituuden mukaan tuolia tilatessa välillä 42-54 cm.

Tästä määritellystä alakorkeudesta tuolia voi säätää sähköisesti 20 cm ylöspäin.

Taakse kääntyvät käsituet



[Katso animaatio käsitukien taivutuksesta](#)



Tekniset tiedot

					
	Istuinosan leveys	Istuinsyvyys	Kokonaisleveys	Kokonais-syvyys	Leveys käsitukien välissä
Adam -työtuoli	460 mm	460 mm	600 mm	560 mm	380-650 mm

					
	Istuinkorkeus matalimmillaan*	Istuinkorkeus korkeimmillaan*	Selkänöjan kallistus	Paino	Max. paino-kapasiteetti
Adam -työtuoli	420 mm	740 mm	75-120°	42 kg	135 kg

*huom. sähköinen korkeudensäätöväli 200 mm, kts. edellinen sivu




Akun tiedot

Akkuteknologia	Suljettu lyijyhappo
Akkukapasiteetti	1200 mA/h



Tumman
harmaa

Runkoväri

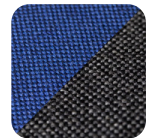

Verhoilun
värvaihtoehdot

Tuotteen jakelija Suomessa:

Camp Scandinavia Oy
Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere

Tuotteen valmistaja:

MSP Medical Spare Parts
De Sonman 7
5066GJ, Moergestel,
Netherlands



Tuote on CE-merkitty ja täyttää
lääkinnällisten laitteiden EU-asetuksen
2017/745 (MDR) vaatimukset.