




Elämäntyyliä täydellisesti sopiva

Invacare **MyOn^{HC}** on suunniteltu aktiiviselle käyttäjälle, joka etsii hinnaltaan edullista ja käyttöominaisuuksiltaan hyvää tuolia, joka on helppo taittaa kokoon käsittelyä, varastointia ja kuljetusta varten. Kahden patentoidun ratkaisunsa ja kevyen rakenteensa myötä uusi **MyOn^{HC}** merkitsee käyttäjälle tuolia, johon voi luottaa. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

- Ainutlaatuinen kokoontaittomekanismi
- Kiinteärunkoisen tuolin vakaus
- Nopea ja portaaton säätö
- Paljon mukautusvaihtoehtoja

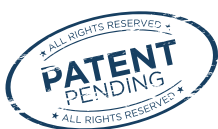

reddot award 2015
winner



Yes, you can.®



Ainutlaatuinen kokoontaittomekanismi



- Pyörätuolin innovatiivisen rakenteen ansiosta runko taittuu **erittäin pieneen kokoon** ja selkänoja taittuu istuimen päälle
- Tuolin kokoon taittaminen on helppoa, joten se on vaivaton **säilyttää ja kuljettaa**



Kiinteärunkoisen tuolin vakaus



- Patentoitu Vaakasuoja "H-Shaped"-taittomekanismi merkitsee parempaa **vakautta verrattuna** muihin markkinoilla oleviin tuoleihin
- Automaattinen lukitustoiminto varmistaa istuimen turvallisen asennon ja tekee tuolista erittäin vaivattomasti kelattavan ja **parantaa käyttöominaisuuksia**



Tuolin säätö käyttäjän istuessa

- Ainutlaatuisen patentoidun teknologiamme ansiosta selkänojan kulmaa voidaan säätää, vaikka **käyttäjä istuu tuolissa**
- Portaaton säädettävyys tekee **arvioinnista ja sovituksesta nopeaa ja helppoa**, mikä takaa täydellisen sopivuuden käyttäjän tarpeisiin
- Tuoliin merkitty asteikko helpottaa **selkänojan tarkan kulman** asettamista



Muokkaa mielesi mukaan

- Laaja värivalikoima antaa käyttäjälle mahdollisuuden muokata tuolia vastaamaan omaa persoonallisuuttaan
- **MyOn^{HC}** voidaan myös **muokata käyttäjän tarpeiden mukaan**, esimerkiksi valitsemalla kiinteään rungon myötä aktiivisempi ilme tai helpottamalla entisestään kokoon taittamista ja kuljetusta kääntyvän mallin avulla
- Kahdella seuraavalla sivulla kerrotaan tarkemmin **MyOn^{HC}**: n tarjoamista vaihtoehdoista
- **MyOn^{HC}** on myös yhteensopiva muiden Invacare-tuotteiden kuten Alberlisävoimalaitteiden kanssa.



Palkittua tekniikkaa

- Invacare **MyOn^{HC}** - tuoli on jo **saanut tunnustusta** voittamalla suunnittelustaan Red Dot Award for Product Design -palkinnon
- Maailman suurin tuotekilpailu Red Dot Award myöntää myös arvostetuimpiin kuuluvia suunnittelupalkintoja



reddot award 2015
winner



MUKAUTETTAVUUS



①



②



③

JALKALAUTAVAIHTOEHDOT



④



⑤



⑥

TARVIKKEET



⑦



⑧



⑨

MUKAUTETTAVUUS

① Istuimen jäykkyyden ja syvyyden säätö

Säädöt onnistuvat helposti hihnojen avulla.

② Painopiste

100 mm:n painopisteen säätö voidaan tehdä 25 mm:n portaittain, hienosäätö jopa 12 mm.

③ Kallistuskulma

Vakiosäädöt ovat 0-2° ja optiona 3 & 4° -säädöt tarvittaessa.

JALKALAUTAVAIHTOEHDOT

④ Sivulle kääntyvät jalkalaudat

Jalkalaudat voidaan kääntää joko sisään tai ulos.

⑤ Kiinteä etuosa

Saatavana on 80°:n kiinteä eturunko itsenäisille käyttäjille.

⑥ Jalkalautavaihtoehdot

Valittavissa on 70°, 80° tai 90° asteen jalkalaudat, nostettavat jalkalaudat tai amputaatiotuki

TARVIKKEET

⑦ Selkänojan suojus

Mukana selkänojatasku ja heijastinraita näkyvyyden parantamiseksi.

⑧ Aktiivinen kaatumisenesto

Sekä käyttäjän itsensä että avustajan käytettävissä lisätukea varten.

⑨ Etupyörät

Pyörävalikoima 4" - 7", myös tyylikäs alumiininen soft-roll-vaihtoehto

KÄSINOJAT



①



②



③

UUDET KÄÄNTYVÄT JA IRROTETTAVAT KÄSINOJAT




④



⑤



⑥

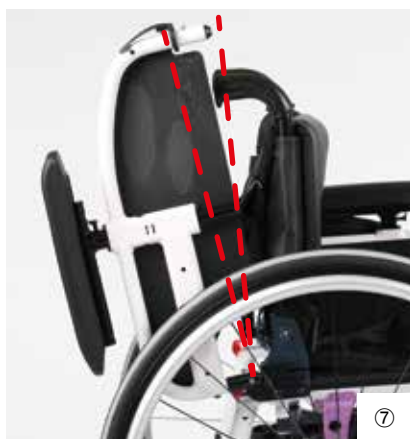

⑦



⑧

KÄSINOJAT

① Lokasuojat

Tyylikkääst ja kevytrakenteiset lokasuojat eivät juurikaan lisää tuolin kokonaispainoa.

② Perinteinen korkeussäädettävä käsinoja

Korkeus säädettävissä liu'uttamalla istuinputkea pitkin.

③ Hemi-käsinoja

Tämä vaihtoehtoinen käsinoja lisää käyttömukavuutta korkeuden, syvyyden ja kallistuskulman säädettävyyden ansiosta.

UUDET KÄÄNTYVÄT JA IRROTETTAVAT KÄSINOJAT

④ Uudet kääntyvät ja irrotettavat käsinojat

Käyttäjän ulottuvilla, kääntyy ulospäin siirtojen helpottamiseksi.

⑤ Korkeudensäätö

Yksinkertainen painike helppoja säätöjä varten.

⑥ Vapautusvipu

Vaikka käden toimintakyky olisi rajoittunut, käsinoja on helppo vapauttaa ja kääntää taakse.








⑦ Taakse käännetty asento








Taakse käännetty käsinoja saadaan pysymään paikallaan helpolla ruuviasetuksella tuoliin asettumisen helpottamiseksi.






⑧ Käännettävä käsivarsipehmuste

Käsinojan asento voidaan kääntää helposti toisin päin, jolloin samaa käsinojaa voidaan käyttää lyhyellä ja pitkällä käsivarsipehmusteella.

TEKNISET TIEDOT

							
Invacare MyOn ^{HC}	305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9 °	Front 360-535 mm in steps of 25 mm Rear: 360-510 mm in steps 25 mm	Fixed 90° Or stepless 90° -15°/+15°	Fixed 300 /325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Adjustable 360-400 and 410-490 mm	Fixed front 80° Swing away legrest Elevating legrest 0-80°

							
Invacare MyOn ^{HC}	Swing away frame: 200-510 mm Fixed frame: 300-530 mm	186-227 mm 186-266 mm 205-280 mm	SW +160 mm To SW+ 250 mm	320 -380 mm	845 -1205 mm	670 -860 mm	701 -1108 mm

					
Invacare MyOn ^{HC}	7°	1050 -1380 mm	100 & 130 kg	From 12,3 kg	From 8,3 kg




Tuote on testattu ja mitattu standardin EN 12183:2014 mukaisesti. Mitat voivat vaihdella 15 mm / 2°. Lisäksi pyörätuolimme täyttävät standardien ISO 7176:2008 ja ISO 10542 vaatimukset, ja niissä on lisäominaisuuksia, jotka lisäävät käyttövarmuutta ja -turvallisuutta moottoriajoneuvolla liikuttaessa. Pyörätuolin käyttäjien tulisi kuitenkin siirtyä ajoneuvon istuimelle ja käyttää ajoneuvon asennettuja turvajärjestelmiä aina, kun se on mahdollista. Tarkempia myyntiä edeltäviä tietoja tästä pyörätuolista on verkko-osoitteessa www.invacare.eu.com. Kuvauksia tyypillisistä käyttäjistä, käyttötarkoituksesta, säädöistä ja kuljetuksesta on käyttöohjeessa.

RUNGON VÄRIT

					
Dark Red	Pop Blue	Anthracite Black	Pearl White	Electric Green	Hypnotic Purple
					
Pearl Grey	Matt Black	Intense Yellow	Vibrating Orange		




Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga
Sverige
Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

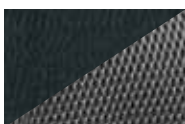VERHOILU



Black Nylon /
Grey mesh

YKSITYISKOHDAT

		
Silver	Blue	Purple

Tuolin värit voivat vaihdella verrattuna väreihin jotka näkyy tässä.

© 2015 Invacare International Sàrl
Alla rättigheter är reserverade för
Invacare.

All information i denna broschyr
stämmer vid tryckningstillfället.
Invacare förbehåller sig rätten att
ändra produktinformation utan
föregående meddelande.

MyOnHC - FI - 10/2015



Yes, you can.®