

UUTUUS!



Täyttää
93/42/ECC ja
EN ISO 10535
vaatimukset

NordBed™ Optimo – kotihoitosängyn uusi optimaali



Uudet **Invacare NordBed™ Optimo** -tuotteen sängyt ovat ihanteellisia kotihoitoon. NordBed Optimo on käyttäjän kannalta poikkeuksellisen mukava ja helppokäyttöinen. Sen saa säädettyä erittäin alas, se edistää itsenäisyyttä ja varmistaa mobilisaation. **ErgoMove™**-teknologian ansiosta käyttäjän voi siirtää makuuasennosta aktiiviseen istuma-asentoon yhdellä painalluksella.

Up-and-Out™-ominaisuus puolestaan varmistaa vaivattomat ja turvalliset siirrot sänkyyn ja siitä pois. **Remember me™** -käyttäjän säätöjen ohjelmointi, helppokäyttöinen käsiohjain ja pidennettävä patja-alusta vakiona. Saatavana optio, joka sopii puhdistettavaksi koneellisesti. Kattava valikoima lisävarusteita, erilaisia sängynpäättyjä ja puu-/metalliosia/värvaihtoehtoja.

Kolme mallia:

NordBed™ Optimo 90, leveys 90 cm / max. 200 kg

NordBed™ Optimo 105, leveys 105 cm / max. 200 kg

NordBed™ Optimo 120, leveys 120 cm / max. 250 kg



Yes, you can.®

Ominaisuudet

ErgoMove™ -teknologia

Invacare NordBed Optimossa on ErgoMove™-tekniikka, jonka avulla käyttäjä voi siirtyä makuuasennosta aktiiviseen istuma-asentoon yhdellä painalluksella. Aktiivinen asento soveltuu paremmin syömiseen, juomiseen ja lukemiseen ja varmistaa hyvän paineenjakautumisen. Liikesekvenssi varmistaa, että asiakas pysyy paikallaan eikä liu'u alas sängyllä. Tämä yhdistettynä sisäänrakennettuun automaattiseen regressioon vähentää merkittävästi hankausta, kun käyttäjä tuodaan istuma-asentoon ja tehostaa paineen jakautumista.



Up-and-Out™ -ominaisuus

Turvallisen ja sujuvan siirtymisen varmistamiseksi ja riippumattomuuden ja mobilisaation tukemiseksi asiakkaat voivat käyttää Up-and-Out™-ominaisuutta yksinkertaisesti painamalla painiketta. Sängyn profiiliosat säätävät automaattisesti sopivaan asentoon, ne siirtyvät sängyn sisään ja ulos, jolloin liike on optimoitu hankauksen minimoimiseksi.



Mallit

Nordbed Optimo 90

Edistää jatkuvasti itsenäisyyttä ja varmistaa mobilisoinnin.



Purettavissa osiin:

Max. käyttäjän paino:

Tuotteen painavin osa:

5 osaa

200 kg

20 kg

Nordbed Optimo 105

Laajempi koko, asiakkaille, jotka tarvitsevat lisää tilaa, sänkyyn sijoittamiseen.



5 osaa

200 kg

25 kg

Nordbed Optimo 120

Extra mukavuutta plus kokoisille käyttäjille



3 osaa

250 kg

70 kg

1

ErgoMove™ -teknologia

► Nostaa makuuasennosta istuma-asentoon

2

Helppo-käyttöinen

► Helppo purkaa kuljetusta ja varastointia varten. Helppo puhdistaa koneellisesti.

3

Laaja kokovalikoima

► Saatavana 90, 105 ja 120 cm leveänä



4

Up-and-Out™

► Turvalliset ja sujuvat siirtymiset sänkyyn ja siitä pois

6

Optimoidut patja-alustan mitat

► Antropometristen mittojen mukaan suunniteltu, lisää käyttömukavuutta

5

Uusi design

► Saatavana valikoima sängyn-päätyjä ja erilaisia pintaviimeistely-vaihtoehtoja

Esimerkkejä AVAINominaisuuksista ja eduista:



Helppokäyttöinen

Optimo 90 ja 105 cm voidaan purkaa 5 osaan. Painavin osa painaa alle 20 kg. Sänky puretaan ja kootaan alustaansa, jolla sitä voi siirrellä vaivattomasti pakettiautosta makuuhuoneeseen. Optimo 120 cm voidaan purkaa 3 osaan ja se voidaan vaivattomasti kuljettaa vaunussansa.



Helppohoitoinen

Mahdollisuus valita runko, joka sopii erityisesti koneelliseen puhdistukseen.

UUDET lisäominaisuudet

RememberMe™:

- Ohjelmoitava LCD-käsiohjain
- ErgoMove ja Up-and-Out voidaan säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Pidennettävä patja-alusta vakiona:

- Lisä 10 cm pituutta pää- ja jalkopäätyyn patja-alustaan integroituna

Anti-Trendelenburg ja optiona Trendelenburg

- Tukee hoitohenkilökuntaa, kun asiakasta asetetaan sänkyyn
- Asentovaihtelu alentaa painetta

Sängyn alusvalo

- Helppo sytyttää
- Pienentää putoamisriskiä ja lisää turvallisuutta

Käsiohjain

Uusi käsiohjain elektroniikka

- ▶ Näppäinpainikkeissa on helposti tunnistettavissa olevat värit. Värit on valittu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.
- ▶ Kaikki painikkeet syttyvät, kun kosketat mitä tahansa painiketta ja voit helposti tunnistaa ne sekä päivällä että yöllä.
- ▶ Yksinkertaiset, eniten käytettävät avainpainikkeet on sijoitettu säätimen yläosaan ja säätöominaisuudet ylös / alas -painikkeiden alapuolelle.
- ▶ Käsiohjaimen lukitus vakiona.




Tekniset tiedot




Kokonaisleveys
Sisäleveys ▼



Kokonaispituus
Sisäpituus ▼

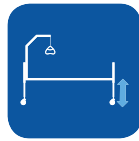


Korkeuden
säätö ▼

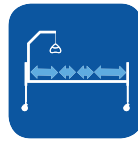

Patja-alustan
mitat ▼



Maavara ▼

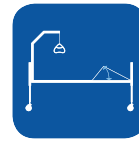

Reisikulma ▼

NordBed Optimo 90	100 / 90 cm	213 / 200 cm	32 - 91 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	49°
NordBed Optimo 105	115 / 105 cm	213 / 200 cm	32 - 91 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	49°
NordBed Optimo 120	130 / 120 cm	213 / 200 cm	32 - 91 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	49°



Jalkaosan
nosto ▼



Anti-
Trendelenburg /
Trendelenburg ▼



Max.käyttä-
paino ▼



Kokonaispaino ▼



Painavin osa ▼



Voidaan
pestä koneel-
lisesti ▼

NordBed Optimo 90	19°	+/- 15°	200 kg	100 kg	20 kg	Kyllä
NordBed Optimo 105	19°	+/- 15°	200 kg	100 kg	25 kg	Kyllä
NordBed Optimo 120	19°	+/- 15°	250 kg	130 kg	70 kg	Kyllä

Runkoväri ja puuosat



Alumiini
harmaa



Pyökki



Tammi



Umбра



Pyökki/
siniharmaa



Siniharmaa



Vaikoinen

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com