



Invacare Aviva RX + Modulite

Uusi **AVIVA RX** takavetoisten sähköpyörätuolien tuoteperhe on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuisia ominaisuusvaihtoehtoja yhdistettynä uuteen teknologiaan ja tyylikkääseen suunnitteluun. Tuloksena maksimi mukavuus ja hallinta sekä sisällä että ulkona. Saatavana joukko eri säätöoptioita runkoon ja istuinjärjestelmään.

Invacare Aviva RX + UltraLowMaxx

AVIVA RX sähköpyörätuolit ovat saatavana sekä Modulite- että UltraLowMaxx istuinjärjestelmillä.

ULM -istuinjärjestelmässä on erittäin alhainen istuinkorkeus ja erinomainen asento käyttäjälle.

Modulite-istuinjärjestelmässä tarjoaa erilaisia asentoratkaisuja ja mukautuu käyttäjien henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja tarpeisiin.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet



DESIGN

Puhtaat linjat, tyylikkääts kulmat ja laadukas viimeistely erottavat todella AVIVA RX:n kilpailijoista. Istuinjärjestelmän, rungon ja hallintalaitteiden vertaansa vailla olevat yksilölliset säätömahdollisuudet ja kompakti (leveys vain 560 tai 630 mm). Erittäin suorituskykyinen, erinomainen ohjattavuus yhdistettynä pitkään ajomatkaan. Istuinkorkeus niinkin alhaalta kuin 435 mm (ULM jopa 420 mm). Täydellinen ahtaissa tiloissa, joissa pieni kääntösäde. Matalan istuinkorkeuden ansiosta pääsy helposti pöydän ääreen.

TEKNOLOGIA

Optiona saatava uusi, erittäin tehokas, tiekäyttöön hyväksytty, **AXENDO**-valaistusjärjestelmä ja **REM400** kosketusnäyttöohjain, jonka käyttöön tarvitaan minimaalisen vähän voimaa (vakiona **REM 216**). **LiNX**-käyttöliittymä helpottaa yksittäisten asetusten määrittämistä tietokoneen, kannettavan tai iOS-älylaitteen avulla. Sisäänrakennettu älykäs kuorman kompensointi tasapainottaa moottoreiden puolieroja ja mahdollistaa tarkemman ja ennakoitavamman ohjauksen. Älykäs moottorien ohjaus tulkitsee ja oppii ajan myötä käyttäjän ajotavat, mukauttaa moottorit muutoksiin ja varmistaa, että pyörätuoli on optimoitu ja tasapainossa käyttäjän vaatimusten mukaisesti. **G-Trac**:n avulla tuoli kulkee haluttuun suuntaan myös kaltevilla ja epätasaisilla pinnoilla.

SUORITUSKYKY

Patentoitu **CTC**-jousitus eristää istuimen tärinältä ja iskuilta ja pitää kaikki neljä pyörää jatkuvasti kosketuksissa maahan, mikä tarjoaa optimaalisen painon ja sujuvan ja hiljaisen ajokokemus käyttäjälle. Parannetut huoltomahdollisuudet moottorien, vaihdelaatikon, suojusten, renkaiden, pyörien ja napoihin helpon pääsyn ansiosta. Elektroniikka sijoittuu laitteen etuosaan siten, että kaikki johdot / liitännät ovat selvästi näkyvissä ja akut voi helposti liu'uttaa ulos takaa.

LiNX-ELEKTRONIIKKA

Invacare LiNX on oivalluksen inspiroima uusi ohjausjärjestelmä, jonka edistyneellinen teknologia, tarjoaa erinomaisen ajokokemuksen käyttäjille ja jonka avulla ammattilaiset voivat ohjelmoida sähköpyörätuolit intuitiivisesti reaaliajassa.

Built-in Bluetooth®

Sisäänrakennettu Bluetooth mahdollistaa käyttäjän olla koko-ajan yhteydessä älylaitteisiinsa. LiNX voi olla yhteydessä 3:een eri laitteeseen samanaikaisesti ja siinä on mouse mover -toiminto.

Ohjaimet



REM216 helpokäyttöohjain

Vakiona LiNX-ohjainvalikoiman yksinkertainen vaihtoehto, jossa joystick-ajotoiminto, nopeudensäätö, äänitorvi, vilkkujen, ajo- ja varoitusvalojen säätö sekä istuimen säätö.



REM400 kosketusnäyttöohjain

Uudessa **REM400** ohjaimessa on vaikuttava 3.5" värillinen, erittäin kirkas ja selkeä kosketusnäyttö, jonka käyttäminen vaatii vain vähän voimaa. Suurella näytössä on myös nopeus- ja matkamittari.



REM500 display only

REM500 on vain kosketusnäytöllinen versio, jossa on 3.5" interaktiivinen kosketusnäyttö, pohjassa ON/OFF ja monitoiminäppäimet, lataus-portti ja 2 -tuloliitintä. Suunniteltu erityisesti käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään vakio-ohjainta.

I.MODULITE™ -ISTUINJÄRJESTELMÄ

- Erilaisia istuintyynejä ja selkäosa-vaihtoehtoja, esim. Matrx®, Rea® ja Flex3 käyttäjän tarpeen mukaan
- Portaaton istuimen syvyys, leveys, kulma ja painopisteen säätö mahdollistavat käyttäjälle täydellisen istuvuuden säätämisen
- Valittavissa säädettävät ja irrotettavat jalkatuet ja käsituot käyttäjän tarpeen mukaan
- Moottoroitu nouseva jalkatuki tukee jalkoja ja pohkeita koko liikealueella
- Kiskojärjestelmä joustavaan lisävarusteiden kiinnitykseen
- 20° tai 30° tility ja 30° kallistus helpottaa painetta
- Korkea nivelkohdat vähentävät hankaumia
- Pikavapautusmekanismi helppoa kokoon-taittoa ja kuljetusta varten

2. Personoi väreillä

Valikoima moderneja väri vaihtoehtoja katteiden ja vanteiden efektiiväreiksi, jotta käyttäjä voi suunnitella tuolin oman makunsa mukaan

9. Patentoitu CTC -jousitus

Helppo siirtyä pehmeästä kovaan jousitukseen. Jousitusasentoa voidaan muuttaa henkilökohtaisen mieltymyksen tai käyttäjän painon mukaan. Lisäämällä jousipari helppo muuntaa HD versioksi (160 kg)

7. Painopisteensäätö

Painopisteen (pituus-) säätö läpi istuimen, rungon ja takarenkaissa takaa optimaalisen painon jaon pyörien päälle, parantaa pitoa ja parantaa ajokokemusta

5. Uudet etuhaarukat

Esteettisesti miellyttävä yksipuolinen haarukka minimoi alustan etulevyyden ilman ulkonevia ruuveja tai haarukkaosia. Saatavana myös kaksipuoleiset etuhaarukat

4. Uudet tukipyörät

8" sisäkäyttöön ja ahtaisiin tiloihin 9" miellyttävään ajamiseen ulkona, esteitä ylittäessä ja maastossa

ULM™ -ISTUINJÄRJESTELMÄ

- Erittäin alhainen istuinkorkeus (jopa 420 mm) ja erinomainen -asento
- Luonnolliset nivelpisteet replikoivat kehonmuotoja
- Varmistaa, että pää, hartiat, lonkat ja jalat eivät koskaan menetä kosketusta tuoliin
- Vähentää merkittävästi hankaumia ja paine-haavariskiä
- jopa 50° tility ja 170° kallistus yhdistettävissä räätälöityyn yksilölliseen asentoon
- Yksilöitävä istuinjärjestelmä, joka mukautuu vartalonmuotoihin
- Vaihtelevat leveys ja syvyys
- Valittavissa eri selkä-, niska-/pää- ja käsitukivaihtoehtoja
- Sisäänrakennettu kisko asentolisävarusteiden asennusta varten



3. Säädettävä istuinkorkeus

420 mm (vain ULM),
435 mm, 460 mm, 485 mm
Riippuu käyttäjän pituudesta ja painopisteen säädöstä

10. Kapea rungon leveys

Vakio: 560 mm – Kompakti,
kapea ja erinomainen
ohjattavuus
Leveä: 635 mm
– parempi stabiilitetti

8. Säädettävä rungon pituus

Vakio = 460/490 tai 520 mm
Leveä = 490/520 tai 550 mm
60 mm pituussäätöalue

6. Akkuvaihtoehdot

60 Ah tai 73.5 Ah valitse sisä- tai
ulkokäytön määrän mukaan

Mallit



Aviva RX 40 + MODULITE

Premium-versio, jossa enemmän ominaisuuksia ja optioita. Ihanteellinen ratkaisu niille, jotka käyttävät tuolia yhtä paljon ulkona kuin sisätiloissa ja / tai tarvitsevat enemmän kliinistä tukea.

- 136 kg
- 12.5 km/h
- 60 Ah



Aviva RX 40 + MODULITE HD

Aviva tuoteperheen Plus-Size -versio
Suurempi maksimi käyttäjäpaino ja leveät istuinvaihtoehdot tekevät HD:sta sopivan suuremmalle asiakaskunnalle.

- 160 kg
- 10 km/h
- 73.5 Ah




Aviva RX 40 + UltraLowMaxx

Huippuluokan moottoroitua asentohoitoa matalalla istuinkorkeudella. Täydellinen ratkaisu positiivisten kliinisten tulosten tuottamiseksi ja liikkuvuuden parantamiseksi.

- 136 kg
- 12.5 km/h
- 73.5 Ah

Tekniset tiedot

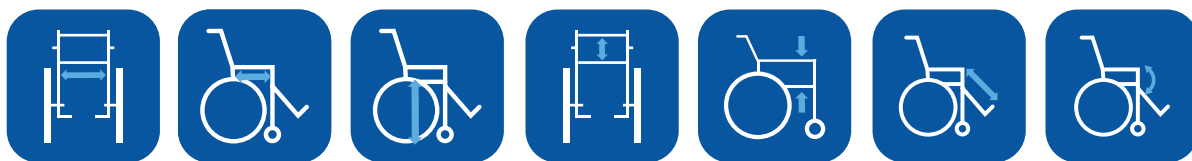

Istuinleveys ▼

Istuinsyvyys ▼

Istuinkorkeus ▼

Selkäosan korkeus ▼

Käsitukien korkeus ▼

Jalkatukien pituus ▼

Istuinkulma ▼

Modulite AVIVA RX 1-osainen istuin:	330 – 480 mm ¹	410 – 510 mm	435, 460, 485 mm ³	Sling selkäosa: 480 / 540 mm	230 – 360 mm	280 – 460 mm	0 - +30° ^{4,5}
Modulite AVIVA RX Teleskooppi-istuin	330 – 580 mm ²			Flex 3: 506 - 610 mm Matrx: 400 / 500 mm			
ULM AVIVA RX	405 – 555 mm	405 – 580 mm	420, 435, 460, 485 mm	355 – 505 mm ²	230 – 405 mm ³	310 – 465 mm ⁴	0 - 50° ⁵



Selkäosan kulma ▼

Kokonaiskorkeus ▼

Kokonaispituus sis. jalkatuet ▼

Kokonaispituus ei jalkatukia ▼

Ajoyksikön leveys ▼

Max. käyttäjä-paino ▼

Akku-kapasiteetti ▼

Modulite AVIVA RX Standard	90 - 120°	1000 – 1335 mm ¹⁰	1026 – 1300 mm ⁸	830 mm	560 mm 635 mm ⁹	136 kg ⁴	52/60/73.5 Ah
Modulite AVIVA RX HD						160 kg	
ULM AVIVA RX	60 - 170° ⁶	1060 – 1540 mm	1202 – 1476 mm	1006 mm	560 mm 635 mm	136 kg	60/73.5 Ah



Kääntösäde halkaisija ▼

Max. esteen-ylityskyky ▼

Max. kallistus ▼

Moottori-kapasiteetti ▼

Nopeus ▼

Ajomatka ▼

Kokonaispaino ▼

Modulite AVIVA RX	1506 – 2086 mm	60 mm (100 mm esteen-ylittäjällä)	6, 10°	2 x 340 W	3, 6, 10, 12.5 km/h	47 km ¹¹	105 – 185.2 kg ¹⁰
ULM AVIVA RX	1975 – 2105 mm	60 mm (100 mm esteen-ylittäjällä)	6°	2 x 340 W	6/10/12.5 km/h	34 km	148.6 – 190.1 kg

- Istuintyyny 380 mm
- + 100 mm käsitukien säädöllä
- Maasta istuinlevyyn ilman tynnyä
- hissillä tai moottoroidulla tilitillä
- Hissillä
- 0°- 45° versio hissillä
- 5° -10° anterior asennusoptiolla
- +5° pre-tilt asennusoptiolla

- Mitattu istuinlevystä
- Mitattu jalkalevystä istuimeen
- Riippuu istuinrasnasta
- Alustan leveys
- Riippuu konfiguraatiosta
- ISO 7176-4:2008 73.5 Ah akuilla @ 6 km/h
- Invacare **Modulite™** istuinkomponentit ovat yhteensopivia Invacare sähköpyörätuolien ja osittain Invacare **Rea®** tuoteperheen kanssa.



Tehostevärit



Black



Mercury Blue



Bengal Red



Silver



Midnight Purple

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility Finland 2020