

Siirrettävä ramppi MRT48080



Camp Mobility Esteettömyyspalvelut on erikoistunut esteettömän asumisen apuvälineiden tuotteisiin ja palveluihin, joilla voidaan optimoida saavutettavuus ja liikkuvuus kodeissa ja julkisissa rakennuksissa. Toimimme asiantuntijana ja laadukkaiden esteettömyysratkaisujen toimittajana.

Valikoimassamme on laaja valikoima esteettömyystuotteita, kuten kynnyslistoja, kynnysluiskia, miniramppeja, moduuliramppijärjestelmiä sekä siirrettäviä salkkuramppeja ja teleskooppiluiskapareja väliaikaiseen käyttöön.

Tuotteet on valmistettu kestävästä materiaaleista, kuten alumiinista ja kuumasinkitystä teräksestä. Ulkotuotteissa on erityinen kävelypinta, jolla on ainutlaatuiset liukastumisen esto-ominaisuudet kaikissa sääolosuhteissa. Tuotteemme ovat käytännöllisiä, turvallisia ja edullisia ja parantavat liikkuvuutta ja asumismukavuutta. Kaikki tuotteet ovat CE-merkittyjä.

Siirrettävä ramppi kuljetustelineellä

LIIKUTELTAVUUS

Rampin kuljetustelineessä on 4 pyörää, joten se on erittäin helppo siirtää ja varastoida. Koko rakenne on purettavissa 3 erilliseen osaan, joten voit helposti ottaa rampin mukaasi autoon.

HELPPO ASENNUS:

Keveyden alumiinirakenteen ansiosta rampin paino on saatu minimoitua. Asennuksen suorittaa alle 2 minuutissa 2 henkilön toimesta.

KOMPAKTI:

Ramppi voidaan taittaa kasaan kahvojen avulla. Tämän ansiosta ramppeja on myös helppo siirtää käyttöpaikasta toiseen ja/tai kuljettaa pitempiä matkoja esim. autolla.

LUISTAMATON PINTA:

Rampin pinta on varustettu pinnoitteella, jolla on täydelliset liukastumisen esto-ominaisuudet kaikissa sääolosuhteissa.

TURVALLISUUS:

Rampin sivuilla on kiinteät 50 mm korkeat reunat liukumis- onnettomuuksien estämiseksi. Rampin alapuolella oleva kumiprofiili varmistaa, että ramppi pysyy paikallaan reunoilla tai portaissa.

VAKAUS:

Jopa raskaan kuormituksen aikana rampin taipuma on mahdollisimman pieni. Tukeva rakenne tarjoaa mukavan tunteen käytön aikana.

LAATU:


Yksikään ramppi ei poistu tuotanto-osastolta ilman perusteellista tarkastusta ja sen luotettavuuden testausta.

DESIGN:

Mobiramp on onnistunut yhdistämään toiminnallisuuden ja kauniin muotoilun valitsemalla oikeat materiaalit ja värit.

KESTÄVÄ KEHITYS:

Kaikki ALU-rampeissa käytetyt materiaalit ovat 100 % kierrätettäviä ja siksi hyviä ympäristöllemme.

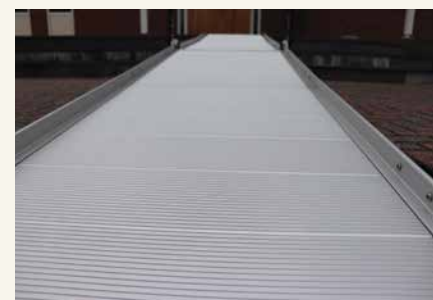



Tuttu tilanne?

Siirreltävä MRT ramppi soveltuu kaikenlaisen tavarankuljetukseen tasolta toiselle. Esimerkiksi pyörätuolikäytössä (niin että tuolissa istuu käyttäjä) tämä soveltuu max. 50 cm tasoeroille ja esim. tavarankuljetukseen tai pelkän pyörätuolin kuljetukseen 100 cm tasoerolle. Tuotteen voi ostaa omaksi tai vuokrata.

Esimerkkejä käyttökohteista:

- Messut ja tapahtumat
- Teatterit / esiintymislavastat
- Koulut
- Museot /näyttelyt
- Hotellit / koulutustilat
- Urheiluseurat

Tapahtumapaikan näyttämö on 50 cm korkea. Miten saamme pyörätuolin käyttäjän tuolle lavalle ilman, että aiheutamme vaaratilannetta?

En pääse kotiin pyörätuolillani. Onko olemassa ratkaisua näiden 3 portaan ylittämiseen? Sen pitää myös olla irrotettava ja siirrettävä. Kiinteä ramppi ei sovellu pihalleni.

Meille on tulossa urheilutapahtuma ja katsomon ja sisäänkäynnin välissä on n. 50cm tasoero. Miten saamme järjestettyä esteettömän kulun tapahtuman ajalle?

Illalla on tulossa bändi soittamaan ja heidän tavarat pitäisi roudata metrin korkealle lavalle, esim. vahvistin painaa 80kg.



Max. 50 cm
pyörätuoli + käyttäjä



Max. 100 cm
tavaroiden
kuljetukseen
ilman käyttäjää



Tekniset tiedot

Tuotenro	Malli	Pituus avattuna	Leveys	Suosittelunousukorkeus	Suurin nousukorkeus	Paino	Max. kuormitus
804651138	MRT48080	495 cm	80 cm	30-50 cm	100 cm	72 kg	250 kg

Valmistaja:
Mobiramp Bv.
info@mobiramp.com
+32 476 55 04 30
+31 182 38 86 22



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita. Camp Mobility © 2024

Rajoitettu 2 v takuu valmistusvirheille.



Support for better life!

www.campmobility.fi

Tilaukset:

info@campmobility.fi
09 350 76 310

Varaosat:

varaosat@campmobility.fi
09 350 76 312

Huolto:

huolto@campmobility.fi
09 350 76 313

Myynti ja sovitus & tuote-esittelyt ja -koulutukset:

Sami Salonen

tuotepäällikkö

sami.salonen@campmobility.fi

045 7200 419

Luiskat ja rampit

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2024 Camp Mobility Finland



Support for better life!

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere | myyntipalvelu p. 09 350 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi