

HORIZON[®] S5



Happirikastin S5 5 litraa

Kompaktin rakenteen ja korkean happipuhtaustason ansiosta

Horizon[®] S5 on fiksu valinta seuraavaksi pitkäaikaiseksi happihoitolaitteeksenne.

Hiljainen

Korkea hapenpuhtaus

Luotettava

Helppo ja intuitiivinen

SCALEO
M E D I C A L

Innovative respiratory solutions

CARDIO-RESPIRATORY DIVISION

TUOTTEEN KESKEISET EDUT



ULTRA HILJAINEN

Horizon® S5 tuottaa vain max. 45 dB:n äänitason virtaustasosta riippumatta.



KEVYT

Ergonomisen ja kompaktin muotoilunsa ansiosta Horizon® S5 painaa vain 15 kg, mikä vähentää toimitus- ja varastointikustannuksia. Kääntyvät pyörät helpottavat liikkumista kotona ja laitoksissa.



LUOTETTAVA

Ymmärrämme, että luotettavuus on tärkein ominaisuus, jota potilas etsii happirikastimesta. Tästä syystä Horizon® S5 sopii käytettäväksi 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, ja sen happipitoisuus on vähintään 93 % (± 3 %) kaikissa asetuksissa. Takuu 5 vuotta. Ääni ja visuaalinen hälytys kaikissa häiriötapauksissa. Lisätiedot ks. käyttöohje.



SOPII USEIMPIIN HAPPIHOITO-OHJELMIIN

Joustavan ohjausventtiilinsä ansiosta Horizon® S5 mukautuu kaikkiin happihoito-ohjelmiin ja reseptimääräyksiin. Laite soveltuu sekä laitos- että kotikäyttöön.



TURVALLISUUS ENSIN

Horizon® S5 on varustettu metallisella ulostuloliittimellä rikkoutumisen välttämiseksi ja nollattavalla katkaisijalla, joka suojaa laitetta kaikilta sähköhäiriöiltä. Täysi hälytysjärjestelmä aktivoituu, jos hapen puhtaus laskee alle 82 %.



HELPPO HUOLTTAA

Ei vaadi määräaikaishuoltoa. Yksinkertaiset hygieniatoimenpiteet riittävät takaamaan ilmansuodattimien ja sisäosien pitkän käyttöiän. Potilas voi vaihtaa tarvittaessa suodattimet itse. Laite ei tarvitse erikoistyökaluja, -ohjelmistoja eikä erillistä kalibrointia



KUSTANNUSTEHOKAS

Alhainen virrankulutus on kustannustehokas ratkaisu potilaille, jotka saavat pitkäaikaista happihoitoa. Näin järjestelmä myös tuottaa vähemmän lämpöä..



YKSINKERTAINEN JA INTUITIIVINEN


Horizon® S5 happirikastimen yksinkertainen ja intuitiivinen säätö mahdollistaa käytön myös potilailla, joilla on rajoitettu sensorinen kapasiteetti.

KESKEISET OMINAISUUDET & PAKKAUS


THE HORIZON[®] S5 PACK

The Horizon[®] S5 toimitetaan sisältäen kaiken, mitä sen välittömään käyttöön tarvitaan. Paketti sisältää:


- Horizon[®] S5 happirikastin
- Käyttöohje
- Ilmankostutin
- Liitinputki ilmankostuttimelle
- Kompressorin suodattimen vaihto
- Nenäkanyyli

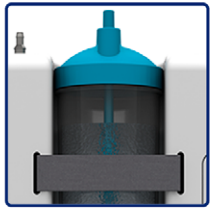

Tarranauhat lisäävät helppokäyttöisyyttä

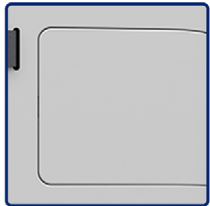


Helposti vaihdettavat suodattimet

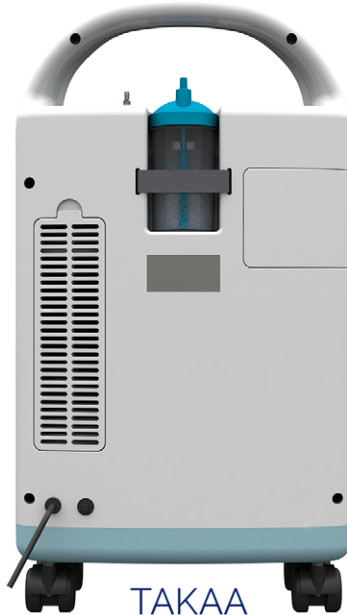


TAKAA



EDESTÄ

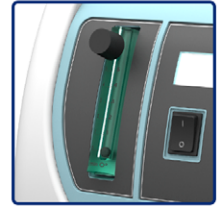

Toimittaa happea jopa 5 L/min, toimii jatkuvalla virtauksella

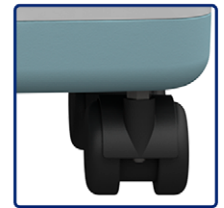

Pyörät jarruilla




Kestävä, sopii intensiiviseen käyttöön

SCALEO
MEDICAL

TEKNISET TIEDOT

Mitat	24 x 38 x 66 cm	Virran yhteensopivuus	220V ±22V / 50HZ ±1 HZ
Paino	15 kg	Ilmankostuttimet	Kaikki hyväksytyt tyypit
Äänenvoimakkuus	≤45 dB	Lähtöpaine	0.05±10% MPa
Happipitoisuus	93% (±3%)	Ympäristö	Lämpötila: +10 to +37°C
Toiminnallisuus	Jatkuva virtaus	toleranssi	Suhteellinen kosteus : 20 - 65%
Hapen virtaus/min	0,5 - 5 LPM	Varastointiympäristö	Lämpötila : -30 to +70°C
Toiminta-aika	24/7	toleranssi	Suhteellinen kosteus: 15 - 95%
Teho	320 W	Takuu	3 vuotta

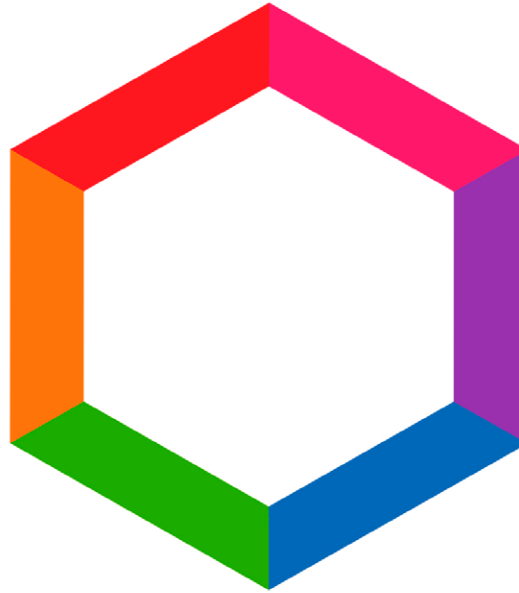

SCALEO
M E D I C A L

Maahantuoja EU-alueelle

SCALEO Medical - 107, rue Dassin - 34 080 Montpellier - France

Tel. +33 467 72 94 86 - Fax +33 499 74 01 79

www.scaleomedical.com - info@scaleomedical.com

CAMP
MOBILITY

Myynti Suomessa

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

09-350 76 310

www.campmobility.fi - info@campmobility.fi



Sysmed (China) Co.,LTD.