

VIKING

EN ELEGANT KLASSIKER



REHASENSE



EN ELEGANT KLASSIKER

VIKING är den klassiska lättviktsrollatorn i aluminium. Den tidlöst eleganta ramen är inspirerad av den rena stilen i dansk design. Tack vare den unika profilen kan rollatorn lätt hållas ren och underhållas. De ergonomiska handtagen under "Click & Safe" säkerhetsspärren möjliggör säkert lyft, och transport av rollatorn.

FUNKTIONER I ÖVERSIKT

- Stor shoppingväska för att bära upp till 5 kg
- Användarvänlig och lätt justerbar handtagshöjd.
- Unikt bärhandtag: ergonomiskt handtag under monteringsstängerna för att lyfta och bära rollatorn.
- Allround säkerhetsreflexer för shoppingväska, ram och handtag.
- Stort utbud av tillbehör som ryggbälte, väskor, bricka, enhandsbroms, släpbroms, rollatorparaply.
- Unik kabelhållare som håller kablarna på plats och ser till att bromsen fungerar optimalt i alla höjdlägen.

STORLEK & FÄRGER

Large: Silver **Medium:** Silver

TEKNISKA DATA

VIKT	Max. brukarvikt	Sitshöjd	Sitsbredd	Bredd hopfäld	Total bredd	Avstånd mellan handtag	Handtagshöjd:
Large 6.2 kg utan shopping-bag 340 gram	upp till 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	74-102 cm
Medium 5.9 kg utan shopping-bag 340 gram		Medium 55 cm					66-86 cm

SPECIELLA EGENSKAPER



TPE hjul, enkla att underhålla och rengöra.




Reflex i framgaffe.




Innovativ kabelhållare.




Ergonomiska formgjutna handtag.

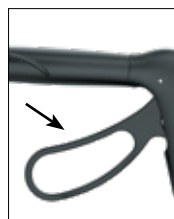

Bromshandtaget kan aktiveras utan större ansträngning.

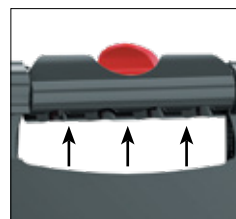

Ergonomiskt handtag för enkelt lyft.

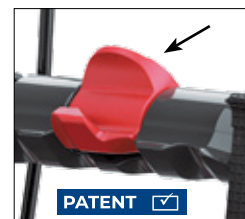

Säker "Click & Safe" låsmekanism.

TILLBEHÖR



Ryggbälte



LED-lampor



Komfortsits

Rehasenses kvalitetsledning följer både ISO 9001 och ISO 13485 standarderna, vilket bekräftats av TÜV NORD. Rehasenses medicintekniska produkter är CE-märkta och uppfyller kraven i EU-förordning 2017/745 (MDR).

