

# **Dolomite<sup>®</sup> Gloss<sup>®</sup>**



**Täydellinen kombinaatio tyyliä ja tukevuutta**

KEVYT | MONIPUOLINEN | MODERNI



# Kävele kävelyt Gloss-kävelytelineellä

**Dolomite** on laajentanut rollaattorivalikoimaansa uudella kevyellä **Gloss**-rollaattorien tuoteperheellä. Kävelyn tukemiseen sisällä ja ulkona suunniteltu **Dolomite Gloss** on ideaali rollaattori lisäämään itsenäisyyttä. Tukeva ja vakaa rollaattori sisältää kaikki arvostetut **Dolomite** valikoiman ydinominaisuudet, mutta siinä on samalla moderni ja huoliteltu ulkonäkö.

Saatavana 4 eri istuinkorkeutta 450 mm – 680 mm väliltä. **Dolomite Gloss** soveltuu erinomaisesti erilaisille käyttäjille aina 160 kg käyttäjäpainoon saakka. Laaja valikoima lisävarusteita, joiden avulla rollaattori voidaan mukauttaa nopeasti erilaisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin.

160 kg:n enimmäiskäyttäjätarvepainon lisäksi, **Gloss** on erittäin kevyt ja ketterä ja siinä on alk. 5,9 kg\*:n alumiinirunko, joka tekee kuljetuksesta ja varastoinnista vaivatonta. Hyvännäköinen kokoonlaitettava ristikkorunko tarjoaa suuren kävelytilan, kun taas tukeva istuin tarjoaa mukavuutta lisätukea tarvitseville asiakkaille.

**Gloss**:n uusi käyttäjäystävällinen kokoonlaittomekanismin helppokäyttöisyys ja lukitusvarmuus tuovat käyttäjälle lisää toimintavarmuutta ja turvallisuutta ja avattaessa.

Monipuolisten ominaisuuksien, laadun ja tukevuuden ansiosta **Dolomite Gloss** antaa kaikille käyttäjille mahdollisuuden kävellä kävelyt turvallisesti ja tyylikkäästi.



## Helppo säilyttää ja kuljettaa



**Gloss**:n runko kokoonlaittuu erittäin kapeaksi, vain 19 cm\*\* kapeaksi, mikä tekee siitä täydellisen pienissä tiloissa säilytettäväksi. Designin ansiosta rollaattori pysyy pystyasennossa myös kokoonlaitettuna.

Itsenäisyyttä lisää myös se, että **Gloss**:n keveys mahdollistaa sen, että avustaja tai käyttäjä itse voi nostaa sen helposti auton tavaratilaan kuljettamista ja matkoja varten.

\*Gloss 450 5,9 kg, Varastokoko Gloss 600: paino 6,5 kg.

\*\*mallit 520, 600 & 680

AVAIN-

ERITYIS-  
OMINAISUUDET



1

### Tilava kävelyalue

► Mukavan tilava kävelytila käsikien ja istuimen välissä edistää hyvää asentoa ja vapauttaa liikkeen aikana.

2

### Korkeussäädettävät, ergonomiset kahvat

► Eteenpäin suunnatut, ergonomisesti muotoillut työntökahvat voidaan korkeus- ja kulmasäätää sopimaan monenlaisille asiakkaille.

3

### Kevyt, kokoontaitettava ristikkorunko

► Paino vain 6.5 kg ja leveys vain 190 mm kokoontaitettuna\*, helppo nostaa ja säilyttää ja pysyy pystyssä kokoontaitettuna

\*Vakio malli 600

4


### Kattava valikoima yksilöllisiin tarpeisiin

► Saatavana 4 eri istuinkorkeutta. Laaja valikoima lisävarusteita varmistaa, että rollaattori voidaan adaptoida sopimaan mahdollisimman monenlaisiin tarpeisiin ja monen kuntoisille asiakkaille.

### Lisää AVAIN ominaisuuksia

- Jarruvaijerit ovat asennettu siten, että niitä on helppo kiristää ja huoltaa.
- Dynaamisten jarrujen ja käsijarrujen yhdistelmä tekee pysähtymisestä ja lepäämisestä vaivatonta.
- Turvalukitushihna turvallista varastointia varten.
- Helposti ulottuvissa oleva, kokoontaitettava säilytyskori tavaroiden kuljettamiseen.
- Parempaa turvallisuutta ja itsenäisyyttä lukuisten lisävarusteiden ansiosta.
- Komponenttien ristiin yhteensopivuus **Gloss**-perheen tulevien mallien kanssa

## 4 avainominaisuutta ja etua

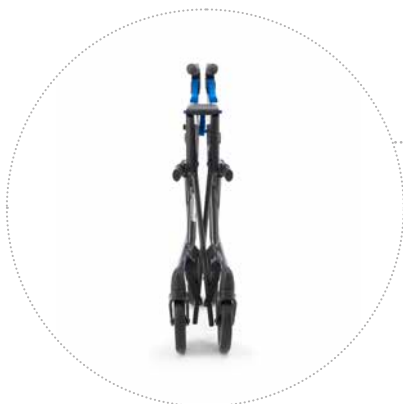

### ◀ Kevyt, ristikkorunkoinen kokoontaitettava design

Sen lisäksi, että **Gloss** on erittäin kevyt, siinä on vaikuttava maksimikäyttäjänpaino 160 kg. Pienen ristikkorungon designin ansiosta runko on erittäin kapea kokoontaitettuna, jonka ansiosta rollaattori on helppo säilyttää erittäin pienessä tilassa.

Kevyen ja pienen designin ansiosta **Gloss** on myös sekä käyttäjän että hoitajan helppo nostaa auton tavaratilaan kuljetusta varten.



### ◀ Monipuolinen valikoima yksilöllisiin tarpeisiin

**Gloss** on saatavana 4 istuinkorkeutta: 450mm, 520mm, 600mm ja 680mm. Eri istuinkorkeudet mahdollistaa parhaan sopivuuden eri kokoisille käyttäjille.

**Gloss** kävelytelineen monipuolisuutta lisää entisestään laaja lisävarustevalikoima, joiden avulla rollaattori voidaan mukauttaa nopeasti olosuhteisiin ja asiakkaan erityistarpeisiin sopivaksi.



### ◀ Suuri kävelyalue

Dolomite rollaattoreille tunnusomaisesti, myös **Gloss**:ssa on laaja kävelytila renkaiden ja istuimen välissä. Mukava alue on suunniteltu edistämään vahvaa, hyvää ryhtiä ja kävelyasentoa ja antaa käyttäjille tukea ja vapautta kävellessä.



### ◀ Korkeussäädettävät, ergonomiset työntökahvat

**Gloss**:n eteenpäin suunnattujen, ergonomisesti oikein sijoitettujen käsikahvojen korkeutta voidaan nopeasti ja helposti säätää sopivalle korkeudelle vain löysäämällä rungon ulkosivulla olevaa siipimutteria.

Eteenpäin suunnatut kahvat voidaan myös kääntää 20° sisäänpäin, silloin, kun ne siinä asennossa vastaavat paremmin käyttäjän tarvetta.

# Esittelyssä **Dolomite Gloss** -tuoteperhe

**Uusi rollaattori Dolomite -tuotevalikoimaan**  
Suunniteltu tyylikkääksi ja kestävämmän.

**Gloss 450****Gloss 520****Gloss 600****Gloss 680**

<b>Korkeudensäätö</b>	635 - 770 mm	725 - 860 mm	795 - 920 mm	915 - 1050 mm
<b>Painokapasiteetti</b>	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
<b>Istuinkorkeus</b>	450 mm	520 mm	600 mm	680 mm
<b>Tuotteen paino</b>	5.9 kg	6.3 kg	6.5 kg	6.8 kg

## Optiot ja lisävarusteet:

- ▶ **Selkätuki:** Mukavuutta ja turvallisuutta istumiseen.
- ▶ **Keppeline:** Helpottaa kävelykepin tai kainalosauvojen mukana kuljettamista.
- ▶ **Kokoontaitettava tavarakori:** Voidaan helposti irrottaa tai pitää rollaattorissa myös kokoontaitettuna.
- ▶ **Tarjotin:** Irrotettava tarjotin ruoan ja juomien kuljettamiseen pöydästä toiseen.
- ▶ **Esteenylittäjä:** Lisäapu kynnysten tai epätasaisten pintojen ylitykseen.
- ▶ **Hemi-työntökahvat:** Optiona yksikäitiseen käyttöön / halvauspotilaille. mainitse tilatessa puoli kummalle puolelle haluat käsijarrun.
- ▶ **Hidastusjarru:** Tarjoaa extra turvaa kun jarruttaminen on vaikeaa.
- ▶ **Jarrutehostin:** Tarjoaa lisäjarrutustehoa heikkovoimaisille.
- ▶ **Istuinpehmuste:** Lisäistuinpehmuste lisää mukavuutta.
- ▶ **Happipullonpidike:** Turvallinen kiinnitys happipulloille.
- ▶ **Yhtenäinen työntötanko:** Mahdollistaa rollaattorin liikuttelun yhdellä kädellä.
- ▶ **Yhden käden jarru:** Mahdollistaa molemmista jarruista samaan aikaan jarruttamisen yhdellä kädellä.
- ▶ **Tippateline:** Turvallinen kiinnitys tippapussille.



- ▶ **Kova etukori**  
Kestävä kova etukori saatavana malleihin 520, 600 & 680.

## Tekniset tiedot ▼

Lisätietoja tuotteesta suomeksi, mukaan lukien tuotteen käyttöohjeet, [www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi) verkkosivustolla.



Kokonaisleveys  
renkaista mitattuna ▼



Syvyys ▼



Leveys renkaiden  
välissä ▼



Kokonaiskorkeus ▼



Istuinkorkeus ▼

<b>Dolomite Gloss</b> <sup>450</sup>	518 mm	615 mm	423 mm	635 - 770 mm	450 mm
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>520</sup>	595 mm	675 mm	501 mm	725 - 860 mm	520 mm
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>600</sup>	602 mm	720 mm	509 mm	795 - 920 mm	600 mm
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>680</sup>	609 mm	790 mm	501 mm	915 - 1050 mm	680 mm



Istuinleveys ▼



Renkaiden halkaisija ▼



Max.käyttäjäpaino ▼



Tuotteen paino\* ▼

<b>Dolomite Gloss</b> <sup>450</sup>	370 mm	200 mm	160 kg	5.9 kg
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>520</sup>	445 mm	200 mm	160 kg	6.3 kg
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>600</sup>	445 mm	200 mm	160 kg	6.5 kg
<b>Dolomite Gloss</b> <sup>680</sup>	445 mm	200 mm	160 kg	6.8 kg

\*Ei sis. lisävarusteita

## Runkoväri ▼



Harmaa

**Tel: +41 61 487 70 70**  
[hqeuropa@invacare.com](mailto:hqeuropa@invacare.com)  
[www.invacare.eu.com](http://www.invacare.eu.com)

Invacare International GmbH  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Switzerland

© 2019 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print.  
Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Dolomite Gloss - EU - 08/2019

