



Rollaattori Dolomite Jazz 520 & Jazz 600

DOLOMITE JAZZ 520 ja *600* ovat edullisia, uuden sukupolven rollaattoreita. Kevyt, kokoontaitettava rollaattori tarjoaa turvallisen tuen ja hyvän vakauden sekä ulko- että sisäkäytössä. Rollaattoreissa on nykyaikainen muotoilu, käytännöllisiä ominaisuuksia ja persoonallisia lisävarustevaihtoehtoja.

Käsitukien portaaton korkeudensäätö ja runkoon integroidut jarrut peittoavat kilpailijansa. Käsitukien oikean korkeuden muistaa helposti selkeiden asentomerkkien avulla. Metallinen etukori taittuu kasaan rollaattorin mukana. Saatavana kaksi eri istuinkorkeutta 52 cm ja 60 cm.



Kätevä kokoontaitettavuus


DOLOMITE JAZZ 520 ja **600**:ssa on tilava kori, joka taittuu kasaan rollaattorin mukana. Kokoontaittaminen on helppoa ja yksinkertaista vetämällä istuimessa olevasta remmistä. Rollaattori pysyy itsenäisesti pystyssä myös kokoontaitettuna ja vie vain vähän säilytystilaa varastoituna. Pehmeä, joustava kangasistuin. Hitsattu alumiinirunko on vakaa ja huoltovapaa koko rollaattorin käyttöä.

Säädettävissä yksilöllisen tarpeen mukaan

Nimensä mukaisesti **JAZZ 520**:n istuin- korkeus on 52 cm ja **JAZZ 600**:n 60 cm. Korkeampi runkorokkeus kannattaa valita pitkille käyttäjille, tai jos käyttäjän on hankala vaihtaa istuma-asennosta seisoma-asentoon.

Portaattomasti korkeussäädettävät työntökahvat on helppo asentaa juuri oikealle korkeudelle, yksilöllisesti, jokaisen käyttäjän tarpeiden mukaan.

Lisävarusteet ja ominaisuudet

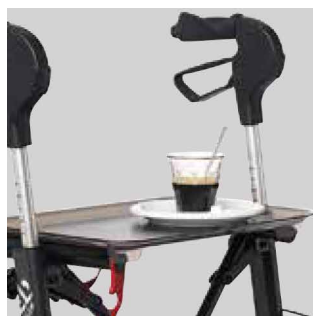

Irrotettava tarjotin

Eväille tai pikkutavaroille. Valmistettu iskunkestävästä muovista.



Metallinen etukori

Tilava kori, joka taittuu kokoon rollaattorin mukana. Max.kuormitus 5 kg.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Jarrutehostin

Tarjoaa lisäjarrutusvoimaa henkilöille, joilla käden voimat ovat heikentyneet.



Laahausjarru

Turvallinen ratkaisu, joka ehkäisee rollaattorin karkaamisen (pari).




Selkätuki

Sekätuki asennetaan käsikahvoihin ja voidaan siten korkeussäätää kahvojen korkeuden säädön avulla.



Keppiteline

Keppitelineen avulla kävelykeppi tai -sauva kulkee helposti mukana ja on nopeasti saatavilla.

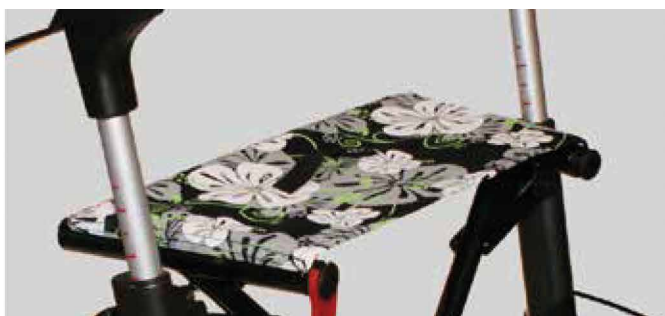


Kuvioitu istuin

Tee rollaattoristasi persoonallisempi valitsemalla kuvioitu istuinkangas. Kysy lisätietoja myyntineuvottelijoiltamme.



Kangassuojus etukoriin

Tee rollaattoristasi persoonallisempi valitsemalla kankainen suojuus etukoriin. Tyylikäs suojuus suojaa etukorissa olevia tavaroita.

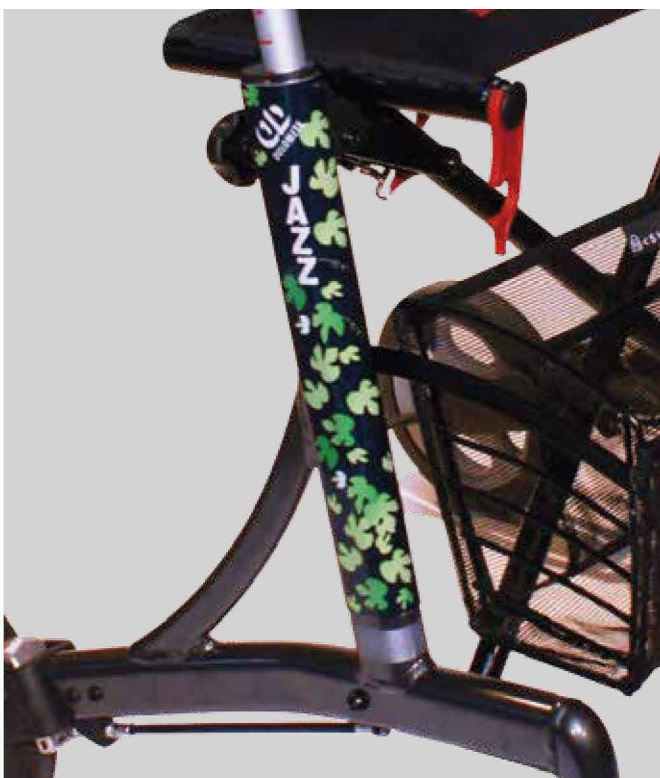

Kuvioidut sivuputket

Tee rollaattoristasi persoonallisempi valitsemalla kuvioidut sivuputket. Kysy lisätietoja myyntineuvottelijoiltamme.

Runkokoot



JAZZ 520

Istuinkorkeus 52 cm. Toimitus sisältää korin ja tarjottimen.



JAZZ 600

Istuinkorkeus 60 cm.

Tekniset tiedot

JAZZ 520	620 mm	680 mm	440 mm	675-815 mm	520 mm	
JAZZ 600	620 mm	680 mm	440 mm	750-970 mm	600 mm	
JAZZ 520	420 mm	200 mm	7 kg	130 kg	290 mm	
JAZZ 600	420 mm	200 mm	7.7 kg	130 kg	290 mm	

Värit ja materiaalit

CE



Dark grey

Valmistaja: Invacare Dolomite AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2016 Camp Mobility Finland